

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS DE HERIDAS Y ÚLCERAS



Avda. Salvador 737, Providencia - Santiago.

Fonos: 222237667 | 222748352

www.inheridas.cl | facebook.com/inheridas



MATERIAL RECOMENDADO PARA CONSULTAR



**Canal de YouTube
FINH**



**Revista
Latinoamericana
de Enfermeras en
Heridas y Ostomías**



Material de Interés

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN	6	7 3M™ PROMOGRAN PRISMA™	35
VACAB	7	8 3M™ FIBRACOL™ PLUS	36
PROTOCOLO NO INFECTADO	8	9 3M™ ADAPTIC TOUCH™	37
ALGORITMO NO INFECTADO	9	10 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE	38
PROTOCOLO INFECTADO	10	11 3M™ ACTISORB™ PLUS 25	39
ALGORITMO INFECTADO	11	12 3M™ TEGADERM™ ALGINATO	40
1 BBRAUN	12	13 3M™ TEGADERM™ HIDROGEL	41
1 PORTADA	12	14 3M™ COBAN™ 2	42
2 CONTACTO	13	15 3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG	43
3 LINOVERA®	14	16 UNIDAD DE TERAPIA 3M™ ACTIV.A.C.™	44
4 LINOVERA® EMULSION	15	17 3M™ MICROPORE™ S	45
5 LINOVERA® SCAR REPAIR	16	3 MOLNLYCKE	46
6 PRONTOSAN® SOLUCIÓN	17	1 PORTADA	46
7 PRONTOSAN® GEL	18	2 CONTACTO	47
8 ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®	19	3 GRANULOX	48
9 ASKINA CALGITROL AG PASTA®	20	4 GRANUDACYN	49
10 ASKINA® FOAM	21	5 MEPILEX AG	50
11 ASKINA DRESSIL®	22	6 MEPILEX	51
12 ASKINA® SORB	23	7 MEPILEX BORDER /SACRUM/HEEL	52
13 ASKINA® BARRIER FILM	24	8 MEPILEX BORDER LITE	53
14 ASKINA SILNET®	25	9 EXUFIBER AG	54
15 ASKINA SCAR REPAIR®	26	10 EXUFIBER	55
16 BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®	27	11 NORMLGEL AG	56
17 CONCEPTO DE HIGIENE DE MANOS	28	12 MEPITEL ONE	57
2 3M	29	13 MEPIFORM	58
1 PORTADA	29	14 MEPITAC	59
2 CONTACTO	30	15 ¿QUE ES SAFETAC?	60
3 3M™ CAVILON™	31	4 MADEGOM	61
4 3M™ CAVILON™ CREMA	32	1 PORTADA	61
5 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM	33	2 CONTACTO	62
6 3M™ TEGADERM™ FOAM	34	3 SUPRASORB® CNP	63

4	DEBRISOFT® PAD	64
5	LOMATUELL® PRO	65
6	ROSIDAL® TCS	66
7	SUPRASORB® A + AG	67
8	SUPRASORB LIQUACEL AG®	68
9	SUPRASORB® C	69
10	SUPRASORB® F	70
11	SUPRASORB® G	71
12	SUPRASORB®P SENSITIVE	72
13	SUPRASORB® X + PHMB	73
14	VARICEX® S	74
15	VLIWAKTIV® AG	75
16	VLIWASORB®	76
5	MEGALABS	77
1	PORTADA	77
2	CONTACTO	78
3	SKINTEGRITY®	79
4	THERAHONEY®	80
5	OPTICELL® AG	81
6	SUREPREP®	82
7	MARATHON™	83
8	SILVASORB®	84
9	OPTIFOAM® GENTLE	85
10	REMEDY® HYDRAGUARD®	86
11	PURACOL®	87
12	UNNA-Z™	88
13	TWOFLEX™	89
14	ULTRASORBS®	90
15	PLUROGEL®	91
16	ABINTRA®	92

6	URGO	93
1	PORTADA	93
2	CONTACTO	94
3	VASHE®	95
4	URGOSTART	96
5	URGOCLEAN AG	97
6	URGOCLEAN	98
7	URGOTUL AG/SILVER	99
8	URGOK2	100
9	CORPITOL	101
10	URGOTUL	102
7	HARTMANN	103
1	PORTADA	103
2	CONTACTO	104
3	HYDROCLEAN	105
4	HYDROTAC	106
5	MOLICARE SKIN	107
6	PEHA INSTRUMENT	108
7	ZETUVIT PLUS SILICONE ZETUVIT PLUS	109
8	HYDROCLEAN SOLUTION	110
8	PROMEDON	111
1	PORTADA	111
2	CONTACTO	112
3	COLACTIVE PLUS	113
4	COVAWOUND	114
5	GENTILTAC	115
6	GENADYNE	116
9	CARDINAL HEALTH	117
1	PORTADA	117
2	CONTACTO	118

3	KENDALL™ AMD	119
4	ESPUMA KENDALL™	120
5	REINFORCED GELLING FIBER + AG	121
6	EXCILON™ AMD	122
7	KERLIX AMD	123
8	XEROFORM	124
9	TELFA AMD	125
10	TELFA CLEAR	126
10	CONVATEC	127
1	PORTADA	127
2	CONTACTO	128
3	AQUACEL AG+ EXTRA	129
4	AQUACEL EXTRA	130
5	AQUACEL FOAM	131
6	ESENTA BARRERA PROTECTORA	132
7	DUODERM GEL	133
8	FLEXIDRESS	134
9	CONVAMAX	135
10	AVELLE	136
11	AVALON	137
1	PORTADA	137
2	CONTACTO	138
3	REOXCARE®	139
4	REOXCARE® GEL	140
5	SUPRATHIEL®	141
12	COMERCCIA	142
8	PORTADA	142
9	CONTACTO	143
10	FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICO	144
13	ESSITY	145
1	PORTADA	145
2	CONTACTO	146

3	CUTIMED® SILTEC® SORBACT	147
4	CUTIMED® SORBION®	148
5	CUTIMED® PROTECT	149
6	CUTIMED® ACUTE	150
7	CUTIMED® SILTEC	151
8	CUTICELL® CONTACT	152
9	JOBST® ULTRASHEER	153
10	JOBST® FORMEN	154
11	JOBST® ULCERCARE	155
12	JOBST® COMPRI2	156
13	FIXOMULL STRETCH	157
14	FIXOMULL SKIN SENSITIVE	158
14	VARIMED	159
1	PORTADA	159
2	KIT DE HERIDAS CON CIERRE DOBLE CAPA	160
3	KIT DE HERIDAS SIN CIERRE DOBLE CAPA	161
4	CALCETIN MICROFIBRA PUNTA ABIERTA	162
5	CALCETIN MICROFIBRA PUNTA CERRADA	163
15	BLUNDING	164
1	PORTADA	164
2	CONTACTO	165
3	MESI ABPI MD	166
4	KIT BOTIN DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO	167
5	BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA	168
6	ZAPATO DE DESCARGA CUIDADO DE HERIDAS	169
7	ZAPATOS PARA DIABÉTICO	170
8	MAXIS MICRO	171
9	CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT	172
10	CIRCAID JUXTA-LITE	173

16	LBF	174	8	NOVAMED MILK	181
1	PORTADA	174	9	NOVAMED OIL	182
2	CONTACTO	175	10	ULMOPLUS	183
3	ACTICOAT™ FLEX 3	176	11	JELONET™	184
4	ALLEVYN™	177	12	BACTIGRAS™	185
5	ALLEVYN™ LIFE / LIFE SACRUM	178	13	REMOVE™	186
6	ALLEVYN™ AG GENTLE BORDER	179	14	OPSITE™ FLEXIGRID™	187
7	INTRASITE™ GEL	180	15	RENASYS<>	188

ÍNDICE INSUMOS CLÍNICOS POR NOMBRES GENÉRICOS

INSUMOS PARA CURACIÓN		PÁGINA
LIMPIADORES DE PIEL		79, 107
REMOVEDOR DE ADHESIVO		27, 186
LIMPIADORES DE HERIDAS		17, 49, 64, 95, 110
DESBRIDANTES		105, 108
PROTECTOR CUTÁNEO		24, 31, 32, 82, 83, 132, 149
HIDRATANTES PARA PIEL		14, 15, 16, 86, 101, 150, 181, 182
APÓSITOS BACTERICIDAS	19, 20, 38, 39, 43, 50, 54, 56, 67, 68, 75, 81, 84, 97, 99, 121, 129, 176, 179	
APÓSITOS BACTERIOSTÁTICOS	18, 73, 80, 119, 122, 123, 125, 147, 183	
APÓSITOS ABSORBENTES	21, 22, 23, 33, 34, 40, 51, 52, 53, 55, 72, 76, 85, 98, 106, 109, 114, 120, 130, 131, 135, 148, 151, 177, 178	
APÓSITOS HIDRATANTES	25, 26, 37, 41, 57, 58, 65, 70, 71, 91, 102, 115, 124, 126, 133, 152, 180, 184, 185, 187	
APÓSITOS REGENERADORES	35, 36, 69, 87, 96, 113, 139, 140	
CINTAS ADHESIVAS	45, 59, 157, 158	

SISTEMA COMPRESIVO	PÁGINA
BOTA DE UNNA	74, 88, 134
VENDA DE DOS CAPAS	42, 66, 89, 100, 156
CALCETÍN COMPRESIVO 40MMHG	155, 160, 161, 162, 172, 173
CALCETÍN COMPRESIVO 18-21MMHG	171
CALCETÍN COMPRESIVO 15-24 MMHG	153, 154, 163
DESCARGAS	PÁGINA
FIELTROS	144
BOTA DE DESCARGA	168
ZAPATO DE DESCARGA	167, 169
ZAPATO TERAPÉUTICO	170
TERAPIAS COADYUVANTES	PÁGINA
PRESIÓN NEGATIVA	44, 63, 116, 136, 188
TERAPIA DE OXIGENACIÓN	48
REVESTIMIENTO DÉRMICO	141
SUPLEMENTO ALIMENTICIO	PÁGINA
SUPLEMENTO NUTRICIONAL	92
MÁQUINA DIAGNÓSTICA	PÁGINA
DISPOSITIVO DE ITB	166
DISPOSITIVO COMPLEMENTARIO	PÁGINA
ABSORBENTE	90

*F*undación Instituto Nacional de Heridas(FINH)), cumple 18 años desde su creación y edita la tercera Guía de Insumos Clínicos de Heridas y Úlceras, por los excelentes resultados por parte de los clínicos a este documento, que se ha convertido en una herramienta de ayuda para aquellos profesionales dedicado a realizar curación avanzada y también para aquellos profesionales que gestionan las compras de estos insumos.

Al igual que en ediciones anteriores, encontrarán una actualización en los protocolos en curación avanzada para heridas y úlceras y los diferentes Dispositivos Médicos que ofrecen las diferentes empresas en Chile. También podrá descargar por medio de código QR las Guías de Insumos Clínicos de Heridas y Úlceras anteriores, las Revista Latinoamericana de Enfermeras en Heridas y Ostomías, además acceder directamente al canal de YouTube de la FINH y finalmente tendrá un link donde se estará subiendo material de interés para el manejo y tratamiento de los pacientes con heridas y ostomías.



VALORACIÓN DE CARGA BACTERIANA DE HERIDAS Y ÚLCERAS, FINH (VACAB)

	Epitelización	Colonización Baja	Colonización Crítica	Infección
Calidad Exudado	Sin exudado	Seroso	Turbio	Purulento
Tejido Esfacelado más Necrótico	Piel cicatrizada	0 %	$\geq 1\%$ - 100%	$\geq 25\%$ - 100%
Piel circundante	Sana, Pigmentada, Descamada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Eritematosa
Calor Local	NO	NO	NO	SI

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2023

CURACIÓN AVANZADA **NO INFECTADO** COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA

Actividad	Observación
VACAB	Cada 15 días
Toma de cultivo	No
Arrastre mecánico	Duchoterapia o jeringa con aguja (solo si aplicas jabón o si la herida o úlcera está con colonización baja)
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2 o 4% 1 vez a la semana
Limpieza de la herida o úlcera	Colonización Crítica: Polihexanida con Betaína o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2% solo una vez por semanas. Colonización Baja: Solución fisiológica o Ácido Hipocloroso 50 a 330 ppm
Desbridamiento quirúrgico	Sobre 25% tejido esfacelado y/o necrótico en colonización crítica
Protección de la piel	-Piel macerada: protector cutáneo -Piel descamada, pigmentada o sana: ácido graso hiperoxigenado o cremas a base de 10% de ureas
Apósito primario	Según algoritmo
Apósito secundario	Tradicional o tradicional especial
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior) cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo
Frecuencia de curación	Según algoritmo de apósitos

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2023

ALGORITMO DE APÓSITOS

HERIDAS O ÚLCERAS NO INFECTADAS COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA



Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2023

Nota: Los Inhibidores de la Metaloproteasa también se pueden aplicar con exudado moderados.

CURACIÓN AVANZADA HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN

Actividad	Observación
VACAB	Cada 7 días.
Toma de cultivo	Aeróbico (con esfacelo) – Anaeróbico y Aeróbico (con tejido necrótico o tejido esfacelado con tejido necrótico).
Arrastre mecánico	Duchoterapia (al tomar el cultivo o si utiliza jabón).
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro a diaria o Clorhexidina Jabonosa al 2-4% 1 vez a la semana.
Limpieza de la herida o úlcera	Polihexanida con Betaína (de preferencia) o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm en cada curación o Clohexidina Jabonosa al 2% por 3 días consecutivos como máximo y luego una vez por semana.
Desbridamiento quirúrgico	Si, siempre.
Protección de la piel	Protector cutáneo
Apósito primario	Apósito con plata, bactericida
Apósito secundario	Tradicional o Tradicional Especial.
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior). Cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo.
Frecuencia de curación	Cada 24 a 48 horas según eritema perilesional y condiciones del paciente

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2023

HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN

Apósito Primario

Con exudado moderado abundante:

- Plata nanocristalina
- Alginato de plata
- Carboximetilcelulosa con plata
- Espuma con plata
- Tul con plata metálica
- Carbón activado con plata

Con exudado escaso moderado:

- Gasa con Plata
- Hidrogel con plata
- Tul con plata iónica

Apósito Secundario

Tradicional o tradicional especial

Frecuencia de cambio

24 a 48 horas

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2023

En el caso de manejo de úlcera de pie diabético infectado o no infectado, es imprescindible la utilización de dispositivo de descarga, tales como zapato, botín o bota de descarga dependiendo del caso.



Sharing Expertise para proteger y mejorar la salud en todo el mundo

Cualquier profesional que quiera mejorar la salud de las personas debe examinar las tareas en cuestión y afrontarlas. Debe renovar constantemente sus conocimientos, reconocer nuevas oportunidades, ser apasionado y comprometido para encontrar soluciones costo-eficientes



www.bbraun.cl



bbraun-chile@bbraun.com



+56 224407100

Nuestro Sharing Expertise nos lleva a tener una cobertura en todo Chile.

Nuestros especialistas técnicos y comerciales están disponibles para ayudarles en la gestión del paciente de manera preventiva y en curación avanzada.

¡Contáctanos !



infoiaas.cl@bbraun.com
customerservice.cl@bbraun.com

ACEITE HIDRATANTE, ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES**LINOVERA®**

Descripción: Solución tópica compuesta por ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática y esencia de romero. Aloe vera y centella asiática actúan como restauradores capilares y contrarrestan el efecto de los radicales libres. Es de uso tópico y se aplica de forma fácil por su dosificador en envase pulverizador.

Indicaciones: En pieles descamadas, pigmentadas, frágiles y prevención de lesiones por presión.

Frecuencia de Uso: 2 a 3 veces al día o el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo. Para su uso, pulverizar el producto sobre la zona deseada y realizar una extensión del producto facilitando la distribución homogénea de éste.



Código	Descripción	Unidad de empaque	Registro ISP
467936	Linovera® Solución 30 ml	Caja x 20 uds	1141C-1

EMULSIÓN HIDRATANTE, ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

LINOVERA® EMULSION

PRODUCTO

Descripción: Solución tópica compuesta por ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática, Ginkgo Biloba y esencia de romero.

Es de uso tópico y se aplica de forma fácil y su dosificación es en envase "airless" y pulsador con bloqueo de seguridad. Para su uso, aplicar el producto sobre la zona deseada y distribuir en forma homogénea.

Indicación: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas donde se deba abarcar una gran superficie, como en las pieles perilesional de las úlceras venosas.

Frecuencia de Uso: Aplicar cada 12 horas



Código	Descripción	Unidad de empaque	Registro ISP
483626	Linovera® Emulsión 50 ml	Caja x 20 unidades	1141C-3

5 **GEL HIDRATANTE PARA CICATRICES**

PRODUCTO **LINOVERA® SCAR REPAIR**

Descripción: Es un gel que contiene ácido hialurónico (0,5%) de bajo peso molecular, ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y favorece su coloración natural, centella asiática, activa la síntesis de colágeno y actúa sobre el tono vascular y Syricalm, combinación de extractos vegetales que reduce el efecto inflamatorio, la tirantez y la rojez y restablece la barrera funcional de la piel.

Indicación: Tratamiento de todo tipo de cicatrices (debidas a cirugía, quemaduras, traumatismos). Después de 8 semanas de aplicación pueden empezar a observarse los primeros signos de recuperación. Los resultados óptimos pueden apreciarse entre los 2 y 4 meses de uso continuado.

Frecuencia de Uso: Aplicar el gel dos veces al día, preferiblemente mañana y noche. Extender el gel sobre la piel limpia y seca, realizando un suave masaje con los dedos sobre la cicatriz. Se recomienda el uso de apósitos protectores de silicona que protegen de la exposición a los rayos UV y potencian el efecto del producto.



Código	Descripción	Unidad de empaque	Registro ISP
492384	Linovera Scar Repair Gel	Caja x 20 unidades	1141C-8

LIMPIADOR DE HERIDAS

6

PRONTOSAN® SOLUCIÓN

PRODUCTO

Descripción: Solución para el lavado y descontaminación de heridas. Esta compuesto por agua purificada, 0.1 % de Betaína y 0.1 % Polihexanida. Se recomienda aplicar una gasa no tejida (gasa con poliéster) en la herida, la que debe sobrepase 2 a 3 cm de la piel perilesional, aplicar el producto y dejar actuar por 10 a 15 minutos. Retirar todo los detritus con una pinza anatómica. Una vez abierto dura 8 semanas o 2 meses sin contaminación.

Indicación: Aplicar en heridas o úlceras con infección o colonización crítica. Si presenta hueso expuesto, proteger hueso con hidrogel, antes de aplicar el producto. En Colonización baja, solo aplicarlo por 5 minutos en una gasa no tejida, ya que no va a necesitar el tensoactivo.

Frecuencia de Uso: Aplicar en cada curación.



Código	Descripción	Unidad de Empaque
400591	PRONTOSAN SOLUTION ROUND BO. "LATAM" 350ML	Caja x 10 unds
400484	PRONTOSAN SOLUTION AMPOULE "INT" 24X40ML	Caja x 24 unds

GEL BACTERIOSTÁTICO

PRONTOSAN® GEL

Descripción: Gel para la descontaminación e hidratación de las heridas. Esta compuesto por 0,1% Betaina, 0,1% Polihexanida, Glicerol, Agua purificada e Hidroxietilcelulosa. Después de la limpieza de la piel y de la herida, aplicar el gel solo en la lesión, cubrir con un apósito secundario como tul de silicona o también con un bacteriostático para potenciar su efecto.

Indicaciones: Se utiliza en todo tipo de herida que presente colonización crítica y exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 días.



Código	Descripción	Unidad de Empaque
400590	PRONTOSAN WOUND-GEL BOTTLE "LATAM" 30ML	Caja x 20

BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®

Descripción: Es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato con plata de (141 mg/ 100 cm²) sobre una espuma de poliuretano con alto poder de absorción. Es un apósito tecnológicamente avanzado que incorpora la efectividad de una barrera de iones de plata con la capacidad de absorción del alginato de calcio y la espuma de poliuretano. La disponibilidad inmediata de plata en estado iónico favorece la actividad antimicrobiana.

Indicaciones: En heridas infectadas con moderado a alto nivel de exudado; heridas parciales o profundas, tales como úlceras por presión, úlceras de pie diabético; úlceras venosas y quemaduras Tipo AB-B o B.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



Código	Descripción	Unidad de empaque
6211010	ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM	Caja x10

BACTERICIDA, PASTA CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL AG PASTA®

Descripción: Es un apósito estéril que en contacto con la lesión proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos sin inducir resistencias. La pasta es de color púrpura, característico de Askina Calgitrol Ag®. Mantiene un ambiente húmedo para la herida que es conducente a las condiciones naturales de la curación. En una matriz de plata iónica (180mg Ag+/Tubo). Tubo de 15 grs.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso-moderado. Se puede aplicar en hueso infectado.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Descripción	Unidad de empaque
6241505	ASKINA CALGITROL PASTE 15 G	Caja x 5

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA
10

ASKINA® FOAM

PRODUCTO

Descripción: apósito de espuma no adhesiva compuesto de 2 capas: una espuma hidrofílica de poliuretano libre de latex con alta capacidad de absorción y un film de poliuretano fino, transparente y protector, impermeable al agua y resistente a bacterias.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja, con exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en traqueostomías u otras zonas de drenaje.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días como máximo.



Código	Descripción	Unidad de empaque
WIN7241010	ASKINA® FOAM 10 X 10 CM	Caja x 10
WIN7242110	ASKINA® FOAM 10 X 20 CM	Caja x 10
WIN7242010	ASKINA® FOAM 20 X 20 CM	Caja x 10
WIN7248510	ASKINA TRACHEA 9.5 X 8.5 CM	Caja x 10


ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ASKINA DRESSIL®

Descripción: Es un apósito de espuma de contacto con silicona fina, se compone de tres capas diferentes. Una película de poliuretano protectora y muy transpirable que actúa como barrera impermeable y contra las bacterias, una capa de espuma hidrófila adaptable y blanda con una excelente capacidad de absorción y una capa adhesiva de silicona perforada que proporciona una adhesión segura a la piel circundante, permite el paso del exudado a la capa de espuma y ofrece una extracción atraumática.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja, con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 3 a 4 días como máximo.

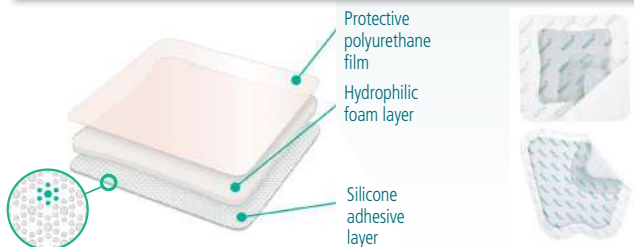

Código	Descripción	Unidad de empaque
5291010	ASKINA® DRESSIL 10X10 cm	Caja x 10
5291210	ASKINA® DRESSIL 10X20 cm	Caja x 10
5292005	ASKINA® DRESSIL 20X20 cm	Caja x 10
5391010	ASKINA® DRESSIL BORDER 10X10 cm	Caja x 10
5491605	ASKINA® DRESSIL SACRUM 16X17.5 cm	Caja x 5

ABSORBENTE, ALGINATO DE CALCIO

12

ASKINA® SORB

PRODUCTO

Descripción: Apósito de fibra de alginato de calcio, con alta capacidad de absorción. La combinación de las fibras con el exudado crea un gel suave húmedo que proporciona un ambiente óptimo para la cicatrización.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja, con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días como máximo.



Código	Descripción	Unidad de empaque
2100S	ASKINA® SORB 6X6 cm	Caja x 15
2101S	ASKINA® SORB 10X10 cm	Caja x 15
2102S	ASKINA® SORB 15X15 cm	Caja x 10
2105S	ASKINA® SORB 2.7X34 cm	Caja x 10

PROTECTOR CUTÁNEO

ASKINA® BARRIER FILM

Descripción: Es un protector cutáneo líquido que forma una película transparente cuando se aplica en la piel. Esta compuesto por un copolímero de acrílico y disiloxano. Se presenta en spray, crema y sachet. Se debe conservar en un lugar fresco y seco.

Indicación: Aplicar en pieles maceradas, eritematosas, puntos de fijación para tubos de drenaje y catéteres externos, pieles sensibles y frágiles, piel periestomal.

Frecuencia de uso: Cada 72 horas o en cada curación o limpieza.



Código	Descripción	Unidad de empaque
5036	ASKINA® BARRIER FILM 28 ML SPRAY BOTTLE	Caja x 12
5038	ASKINA® BARRIER CREAM 92G	Caja x 12
5037	ASKINA® BARRIER FILM 1 ML SWAB	Caja x 25

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

ASKINA SILNET®

14

PRODUCTO

Descripción: Es un apósito de contacto de silicona fino, poroso, que se constituye de un tejido no tejido cubierto en ambas caras con una capa suave de silicona. No tóxico, no irritante e hipoalergénico. Debe ser utilizado con un apósito secundario. No contiene látex. La estructura porosa permite el paso vertical de exudado al apósito secundario.

Indicaciones: Para el manejo de una amplia gama de heridas con colonización baja con exudado escaso como: Heridas cortantes, abrasiones, laceraciones, heridas traumáticas, quemaduras 1ro y segundo grado, fijación de injertos, zona dadora de Injertos, heridas post-operatorias.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días.

**Código****Descripción****Unidad de
empaque**

5197510 ASKINA SILNET 10 X 7.5 CM

Caja x 10


HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES

ASKINA SCAR REPAIR®

Descripción: Es un apósito fino, adaptable, reutilizable no estéril compuesto por film exterior laminado no tejido de poliuretano, transpirable y resistente al agua, una capa de gel de silicona que en contacto con la piel se adapta a la superficie de esta y se adhiere de forma segura. Los apósitos de silicona reducen el picor y la sensación de tirantez, son discretos sobre la piel y ofrecen protección UV.

Indicaciones: Tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides (post operatorio) y puede usarse también en heridas cerradas para la prevención de las cicatrices hipertróficas o queloides tras la cirugía. Está indicado solamente para uso externo.

Frecuencia de Uso: Revisar cada 24 horas adherencia y duración hasta 7 días.

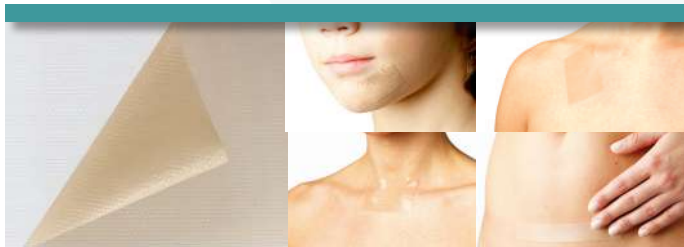

Código	Descripción	Unidad de empaque
WIN569140	ASKINA SCAR REPAIR 2 X 14CM (1 sobre 5 strips)	Caja x 3 sobres
WIN5691805	ASKINA® SCAR REPAIR 10x18CM	Caja x 5
WIN5694305	ASKINA SCAR REPAIR 4 X 30CM	Caja x 5
WIN5695705	ASKINA SCAR REPAIR 5 X 7.5CM	Caja x 5

REMOVEDOR DE ADHESIVO

BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®

Descripción: Es un removedor de adhesivo a base de silicona para remover dispositivos médicos en la piel, de una manera rápida e indolora para el paciente, utilizado para el cuidado del estoma y para la retirada de cualquier dispositivo médico adherido en la piel.

Indicación: Utilizar para el cuidado del estoma, para remover las placas de los estomas y para la retirada de cualquier dispositivo médico adherido en la piel, como adhesivo de las cintas adhesivas o de apósitos adheridos en la piel.

Frecuencia de Uso: Las veces necesarias para remover el adhesivo.



Código	Descripción	Unidad de empaque
2005-1	B Braun® Adhesive Remover 50ML Aerosol G	Caja x 24

CONCEPTO INTEGRAL EN HIGIENE DE MANOS

CONCEPTO DE HIGIENE DE MANOS BBRAUN

La Higiene de Manos es la estrategia más simple, económica y efectiva para prevenir las IAAS. Una simple acción y centrado en el paciente y en los profesionales de Salud.

infoiaas.cl@bbraun.com



Hand Cleansing >

Softaskin
Limpieza de manos





Hand Disinfection >

Softalind
Desinfección de manos





Hand Care >

Trixo-Lind
Cuidado de manos



Código	Descripción	Unidad de empaque
180225	SOFTASKIN BOT.FOLD (DP) "LATAM" 500ML	Caja x 20
180226	SOFTASKIN BOT.FOLD (DP) "LATAM" 1000ML	Caja x 10
180021	SOFTALIND VR BOTTLE CL 100ML	Caja x 20
19890	SOFTALIND VR 500ML-ALCOHOL GEL	Caja x 20
19891	SOFTALIND VR 1000 ML-ACOHOL GEL	Caja x 10
180278	TRIXOLIND BOTTLE (DP) "WEST" 500 ML	Caja x 10

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™



3M contribuye a mejorar el cuidado de la salud mediante soluciones que ayudan a acelerar la curación y prevenir complicaciones, transformando los resultados clínicos de los pacientes.

DISTRIBUIDOR			
CENCOMEX S.A			
	+569 7495 6370		cencomex@cencomex.cl
COMERCIAL LIMAX SPA			
	+56 75 222 2359		ventas@limax.cl
CIRUMED LTDA.			
	+562 2220 6668		ventas@cirumed.cl
CODIMED			
	+562 2231 5550		ventas@codimed.cl
	+562 2334 0761		
COMERCIAL GBG			
	+562 2225 6210		ventas@gbg.cl
	+562 2225 6232		
DROGUERIA HOFMANN			
	+569 9749 7202		atencionclientes@hofmann.cl
	+569 6779 0689		
MEDCORP			
	+562 2951 6936		contacto@medcorp.cl
MUNNICH FARMA MEDICAL SPA			
	+569 9078 8528		isabel.martinezg@femsasalud.com
NIPRO MEDICAL CORPORATION			
	+569 7757 3487		patriciai@nipromed.com

PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON™

PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR

Descripción: Protector cutáneo transparente. Compuesto por polímeros de acrilato, contiene solvente como el Hexamethyldisiloxane y plastificante. Libre de alcohol, no arde, no tóxico ni citotóxico, compatible con Gluconato de Clorhexidina y Povidona Yodada. Aplicar a 10 cm de distancia y dejar secar por 30 segundos, en caso del spray. Se recomienda dejar secar por al menos 90 segundos antes de usar cualquier dispositivo que sea inflamable. No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones: Pielles eritematosas o maceradas, lesiones periorostomales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo, Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI), lesiones por adhesivos de uso sanitario (MARSI) y por fricción o roce.

Frecuencia de uso: Cada 72 horas o en cada curación.



Modelo	Medidas	Empaque	ID CM
3346E	Spray 28 ml	Caja de 12 uds.	1858519
3343E	Hisopo 1 ml (estéril)	Caja de 25 uds.	

4 CREMA HIDRATANTE- PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON™ CREMA CREMA DE BARRERA DURADERA

Descripción: Crema protectora e hidratante-emoliente, respirable no oclusiva. Fórmula única: Dimeticona + aceite de coco + terpolímero de acrilato. No fabricado con látex de caucho natural. Libre de alcohol y perfume, compatible con Gluconato de Clorhexidina.

Indicaciones: Disminución del riesgo de Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) categoría 1A en pacientes con deposiciones formadas u orina. Hidratación del cuerpo y puntos de apoyo y en pacientes que presentan xerosis.

Frecuencia de uso: Hidratar el cuerpo o punto de apoyo cada 24 horas. Para disminución del riesgo de DAI o DIP, cada 3 lavados.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
3392G	Pomo de 92 gr	Caja de 12 uds.	1858514

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON ADHESIVO

3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM

Descripción: Espuma hidrofílica con adhesivo de silicona multicapas (5 capas), con bordes finos. Disminuye fricción, controla exudado y microclima. Por la cara externa, indica nivel de saturación. El adhesivo de silicona permite ver y evaluar la piel, es reposicionable y fácil de aplicar y remover.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante y en los protocolos de disminución del riesgo de las lesiones por presión.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
90631	Cuadrado sin borde, 10x10 cm	Caja de 10 uds.
90642	Cuadrado con borde, 15x15 cm	Caja de 10 uds.
90646	Talones, codos y contornos, 15x15 cm	Caja de 5 uds.
90648	Zona sacra, 18,5x22 cm	Caja de 5 uds.

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO

3M™ TEGADERM™ FOAM

Descripción: Apósito de espuma absorbente no adherente de poliuretano moldeable y transpirable. Tetralaminar (4 capas). Regula la evaporación de vapor de agua a través de la capa semipermeable. No fabricado con látex de caucho natural. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado. También puede usarse alrededor de cánulas o tubuladuras.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días en heridas y úlceras.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
90601	Apósito de espuma de 10x10 cm	Caja de 10 uds.
90602	Apósito de espuma de 10x20 cm	Caja de 5 uds.

REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS

3M™ PROMOGRAN PRISMA™

PRODUCTO

Descripción: Apósito primario liofilizado estéril compuesto por 55% de colágeno, 44% de celulosa oxidada regenerada (COR) más un compuesto de COR + plata al 1%. Modulador de Metaloproteasas y Elastasas. Favorece la formación de tejido de granulación, epitelización y la rápida cicatrización.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 72 horas y en úlceras con exudado abundante cada 24 horas



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
PS2028	Apósito hexagonal de 28 cm2	Caja de 10 uds.
PS2123	Apósito hexagonal de 123 cm2	Caja de 10 uds.

8 REGENERADOR, COLÁGENO CON ALGINATO

3M™ FIBRACOL™ PLUS

Descripción: Apósito compuesto por un 90 % de colágeno y un 10 % de alginato de calcio. En presencia del fluido de la úlcera, mantiene un microambiente fisiológico húmedo en la superficie de la lesión que es favorable para la formación de tejido de granulación y epitelización. Se recomienda retirar el remanente de apósito que no se haya transformado en gel.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja y exudado escaso a moderado.

Frecuencia de cambio: Cada 2 o 4 días o según protocolo de la institución.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
2981	Apósito de colágeno de 5,1x5,1 cm	Caja de 12 uds.
2982	Apósito de colágeno de 10,2x11,1 cm	Caja de 12 uds.
2983	Apósito de colágeno de 10,2x22,2 cm	Caja de 6 uds.
2984	Apósito de colágeno de 1x50 cm (cuerda)	Caja de 6 uds.

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

3M™ ADAPTIC TOUCH™

Descripción: Capa de contacto flexible, de malla abierta de acetato de celulosa siliconada, diseñada para optimizar el tratamiento del fluido y minimizar el dolor al cambiar el apósito. El pequeño tamaño de los poros minimiza el riesgo de crecimiento interno del tejido de granulación. No se resbala. No deja residuos. Si necesita cortarlo, hágalo con los 2 liner o láminas protectoras.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja. Se puede utilizar bajo la Terapia de Presión Negativa bajo indicación del médico(a) o enfermero(a) a cargo.

Frecuencia de cambio: Cada 7 días.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
TCH501	Capa de contacto siliconada de 5x7,6 cm	Caja de 10 uds.
TCH502	Capa de contacto siliconada de 7,6x11 cm	Caja de 10 uds.
TCH503	Capa de contacto siliconada de 12,7x15 cm	Caja de 10 uds.
TCH504	Capa de contacto siliconada de 20x32 cm	Caja de 5 uds.


BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE

Descripción: Apósito antimicrobiano de hidroalginato con plata, que posee una capa no adherente de Etil-metil-acrilato (EMA) para proteger el lecho de la herida, en especial durante el cambio del apósito. La capa no adherente Easy Lift™ facilita el uso del apósito. No se adhiere al tejido, controla eficazmente el exudado en heridas moderadamente o muy exudativas y crea las condiciones óptimas de curación en ambiente húmedo, permitiendo retirar el apósito íntegro sin dejar residuos, disminuyendo el dolor y el traumatismo.

Indicaciones: Heridas o úlceras infectadas con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 24 a 48 horas

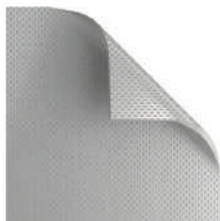

Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
CAD7050	Apósito antimicrobiano de 5x5 cm	Caja de 10 uds.	1860295
CAD7011	Apósito antimicrobiano de 11x11 cm	Caja de 10 uds.	-
CAD7020	Apósito antimicrobiano de 10x20 cm	Caja de 5 uds.	-
CAD7230	Apósito antimicrobiano de 2,5x30,5 cm (cuerda)	Caja de 5 uds.	-

BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

3M™ ACTISORB™ PLUS 25

11

PRODUCTO

Descripción: Apósito microbicida, compuesto por una malla de carbón activado puro, impregnado con plata metálica, contenido en el interior de una malla termosellada de fibras de nylon no tejida. No se puede cortar.

Indicaciones: Heridas y úlceras con contaminación bacteriana, infección con exudado abundante o mal olor.

Frecuencia de cambio: Cada 24 a 48 horas.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
MAP065	Apósito de carbón activado con plata de 6,5x9,5 cm	Caja de 10 uds.
MAP105	Apósito de carbón activado con plata de 10,5x10,5 cm	Caja de 10 uds.
MAP190	Apósito de carbón activado con plata de 10,5x19 cm	Caja de 10 uds.

ABSORBENTE , ALGINATO DE CALCIO

3M™ TEGADERM™ ALGINATO

Descripción: Apósito absorbente hemostático suave, compuesto de alginato grado médico 100%. Absorbe exudado en cantidades abundantes, de rápida gelificación y no desintegración. Alta integridad. Se puede introducir en cavidades y/o bolsillos. No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades y en sangrados leves tipo napa por su efecto hemostático suave.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
90112	Apósito de alginato de 10x10 cm	Caja de 10 uds.	1885750
90120	Apósito de alginato en mecha de 30,4 cm	Caja de 5 uds.	1885745

HIDROGEL, GEL AMORFO

3M™ TEGADERM™ HIDROGEL

Descripción: Gel amorfo estéril, sin conservantes, formulado como desbridante autolítico e hidratante. La consistencia del gel permite entregar humedad por más tiempo, trabajar en cavidades y zonas difíciles sin que se desplace o escurra. Aplique sin que sobresalga el tamaño de la herida. Cubrir con apósitos secundarios que mantengan el control de la humedad. No fabricado con látex de caucho natural. Hipoalergénico.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Cada 72 horas



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
90110	Tubo de 15 gr	Caja de 10 uds.	1858616


SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS

3M™ COBAN™ 2

Descripción: Sistema compresivo de 2 capas de estiramiento corto, eficiente y cómodo, compresión sostenida hasta por 7 días. Primera capa de poliuretano (no estirar) y cohesivo, que se une a la segunda capa autoadherente (estirar) y en conjunto, otorgan compresiones de 35 a 40 mmHg en reposo, favoreciendo retorno venoso y el rápido cierre de las úlceras venosas. Hipoalérgénico. No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones: Indicado para tratamiento de úlcera venosa y linfedema. Con ITB mayor o igual a 0,9.

Frecuencia de cambio: Según característica de la úlcera y apósito primario. Máximo por 7 días.

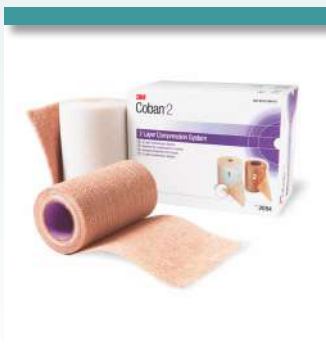

Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque
2094N	Kit de Sistema Compresivo de 2 capas	Caja de 1 kit

BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG

Descripción: Apósito absorbente microbicida tópico de amplio espectro, compuesto de alginato de calcio de alta integridad, complejo de plata y carboximetilcelulosa, los iones de plata son liberados al contacto con el exudado de la herida de forma controlada. Flexible, adaptable, absorbe alta cantidad de exudado y no deja residuos. Se puede cortar. No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones: Heridas o úlceras con infección y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades.

Frecuencia de cambio: Cada 24 a 48 horas.



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
90301	Apósito de alginato con plata de 5x5 cm	Caja de 10 uds.	1885740
90303	Apósito de alginato con plata de 10x12,7 cm	Caja de 10 uds.	1860297

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

UNIDAD DE TERAPIA 3M™ ACTIV.A.C.™

Descripción: Equipo liviano, pequeño y portátil, con sistema integrado que proporciona la Terapia de Presión Negativa (TPN) y tecnología 3M™ SensaT.R.A.C.™.

- Uso intrahospitalario y ambulatorio, trae bolso de transporte
- Rangos de presión desde -25 a -200 mmHg
- Modalidad de terapia Continua o Intermitente
- Función 3M™ Seal Check™ que ayuda a detectar fugas
- Pantalla táctil: Programación de terapias, en modalidades Clínico y Paciente. Bloqueo de pantalla
- Alarmas de batería baja, contenedor lleno, fuga, presión baja, obstrucción, terapia inactiva y otras

Indicaciones: Preferentemente en heridas o úlceras con infección o colonización crítica.

Frecuencia de Cambio: Se recomienda cambios cada 48 horas o según protocolo institucional.



Insumos compatibles con Unidad de Terapia ActiV.A.C.™

Cánister 3M™ V.A.C.® 300cc, Kit de apósitos 3M™ V.A.C. Simplace™ Ex, 3M™ V.A.C.® Granufoam™, 3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™, Apósitos 3M™ V.A.C. Whitefoam™

CINTA ADHESIVA NO OCLUSIVA DE SILICONA

3M™ MICROPORÉ™ S

17

PRODUCTO

Descripción: Cinta adhesiva con respaldo de papel y plástico con adhesivo de silicona, presenta buena adhesión inicial y a largo plazo (48 horas), se puede reposicionar y rasgar fácilmente con la mano, ayuda a mantener la integridad de la piel, se puede usar en pieles sensibles. Adecuada para ser usada y removida en forma gentil, en niños mayores de 6 meses de edad, además puede ser usada en piel de adultos mayores.

Indicaciones: Pacientes que necesiten disminuir el riesgo de MARSÍ en procedimientos como fijación de gasa post extracción de sangre, fijación de tubos y/o drenajes no críticos.

Frecuencia de cambio: Cada 24 a 48 horas, reposicionable



Modelo	Medidas / Formato de venta	Empaque	ID CM
2770-1	Cinta con adhesivo de silicona de 2,5cm x 5m	Caja de 12 uds.	1858458



Mölnlycke®

MÖLNLYCKE HEALTH CARE



MEJORANDO LOS RESULTADOS EN SALUD

Diseñamos y proveemos soluciones médicas para mejorar los resultados del sector salud tanto en el hospital como en el domicilio.

Empresa líder en el Cuidado de Heridas a nivel mundial, fundada en Suecia en 1849.

SafetaC[®]
TECHNOLOGY



www.molnlycke.com



ventas.chile@molnlycke.com



+569 39173843



@molnlycke-latam



@möllycke-latam



@molnlycke-elatam



DISTRIBUIDORES

Cobertura Nacional y Venta a Particulares

MEDIPLEX S.A.



www.mediplex.cl

+562 2483 6000

ventas@mediplex.cl

TERAPIA DE OXIGENACIÓN

GRANULOX

Descripción: Spray oxigenante. Contiene hemoglobina altamente purificada que toma moléculas de oxígeno del ambiente y se distribuye por el exudado de la herida. El aporte de oxígeno al lecho de la herida reduce el tiempo de cicatrización, reduce los niveles de dolor del paciente y los costes de enfermería.

Indicación: Heridas crónicas, como úlceras venosas, úlceras arteriales y/o mixtas, úlceras de pie diabético, cicatrización por segunda intención de heridas quirúrgicas y úlceras por presión.

Frecuencia de Cambio: Aplique en cada cambio de apósito, como mínimo, cada 3 días. Rinde 30 aplicaciones. Cada pulverización entrega 0,4ml (4x4cm aprox) Contiene 5 cabezales pulverizadores de recambio.



Código

Medidas

Unidad de venta

360001

SPRAY 12 ML

1

LIMPIADOR DE HERIDAS

4

GRANUDACYN

PRODUCTO

Descripción: Solución de irrigación para la limpieza y humectación de heridas. Contiene ácido hipocloroso/hipoclorito de sodio (HOCl/NaOCl), hipotónico para promover la osmólisis y ruptura celular y control del biofilm. Facilita la extracción mecánica de residuos celulares y microorganismos. pH neutro, no citotóxico ni irritante. Reduce el mal olor de las heridas.

Indicación: Heridas o úlceras, como úlceras del pie diabético, úlceras por presión, úlceras venosas, etc. Todas las heridas agudas, cortes, mordeduras, desgarros, laceraciones. Heridas quirúrgicas (intraoperatorias y postoperatorias). Heridas en cartílagos, tendones, ligamentos o huesos. Quemaduras de hasta segundo grado. Úlceras inducidas por radiación. Fístulas y abscesos. Cavidades como oídos, nariz, garganta

Frecuencia de Uso: Adecuado para uso multipacientes, por 60 días (solución). Comienzo de acción: 30 segundos- 5 minutos.



Código	Medidas	Unidad de venta
360100	250 ml solución spray	1
360101	500 ml solución	1
360102	1000 ml solución	1
360108	100 gr gel spray	1
360107	50 gr gel	1

BACTERICIDA, ESPUMA DE POLIURETANO CON PLATA IÓNICA

MEPILEX AG



Descripción: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, sulfato de plata y carbón activo. Film exterior semioclusivo y una película de suave silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que actúa sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración.

Indicación: Manejo de heridas o úlceras infectadas con un nivel de exudado moderado-abundante como por ejemplo: úlceras vasculares, quemaduras, pie diabético, etc.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas o según saturación del apósito.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
287110	10 x 10cm	5	1929412
287210	10 x 20cm	5	
287310	15 x 15cm	5	
287410	20 x 20cm	5	
287510	20 x 50cm	2	

ABSORBENTE , ESPUMA DE POLIURETANO CON SILICONA

6

PRODUCTO

SafetaC®
 TECHNOLOGY

MEPILEX

Descripción: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, film exterior semioclusivo y una película de suave silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que posee una microadherencia selectiva (evita adherencia al lecho húmedo de la herida y se adhiere suavemente a la piel perilesional seca), sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración. Absorbe eficazmente incluso bajo compresión.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Debe fijarse a los bordes sanos perilesionales al menos 1-2 cm . Puede recortarse a la medida que se requiera.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días, o según saturación del apósito.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
294100	10 x 10cm	5	1942842
294299	10 x 20cm	5	-
294300	15 x 15cm	5	1942852
294400	20 x 20cm	5	1944847

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

MEPILEX BORDER / SACRUM/HEEL

SafetaC®
TECHNOLOGY

Descripción: Espuma de diseño exclusivo de 5 capas probado clínicamente con SafetaC®, capa de contacto que minimiza el dolor y permite reposicionamiento. Disponible en una amplia gama de formas y tamaños.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Prevención de lesiones por presión, manejando los 4 factores extrínsecos que contribuyen a su formación (presión, fricción, cizalla y microclima).

Frecuencia de Cambio: Según saturación del apósito por exudado cada 72 horas; como prevención por 7 días.

	Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
BORDER	295200	7,5 x 7,5cm	5	
	295300	10 x 10 cm	5	1942817
	295400	15 x 15cm	5	1942822
	295600	15 x 20cm	5	1942832
	295800	10 x 20cm	5	1942827
	295850	10 x 25cm	5	1942837
SACRUM	282410	22 x 25cm	10	1942802
	282010	16x20 cm	10	1945102
HEEL	282710	22 x 23 cm	10	1942807



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA EXTRAFINA

8

PRODUCTO

SafetaC®
TECHNOLOGY

**MEPILEX BORDER
LITE**

Descripción: Apósito extrafino y autoadherente de espuma con tecnología Safetac para heridas con poco exudado. Su diseño aporta comodidad, especialmente eficaz para zonas complicadas como pies, manos y dedos. Atraumático en el cambio de apósitos.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. Versión con bordes ideal para prevención de lesiones o protección de piel, bajo dispositivos.

Frecuencia de Cambio: Uso preventivo por 5 a 7 días. Según saturación del apósito por exudado cada 72 horas.



	Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
MEPILEX BORDER LITE	281000	4 x 5cm	10	1942857
	281100	5 x 12,5cm	5	1942867
	281200	7,5 x 7,5cm	5	1942862
	281300	10 x 10cm	5	1930447
	281500	15 x 15cm	5	

BACTERICIDA, FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL (PVA)

EXUFIBER AG

Descripción: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA) y sulfato de Ag+ que permite manejo de infección y biofilm. En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el medio ambiente óptimo para la cicatrización de heridas. Gran poder de integridad (permite retiro en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención (Tecnología Hydrolock).

Indicación: Tratamiento en heridas infectadas cavitadas y con exudado alto, como las úlceras del pie diabético o vasculares, las úlceras por presión y heridas quirúrgicas.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
603421	5 x 5 cm	5	
603420	2 x 45 cm	5	1942772
603425	10 x 10 cm	10	1942777
603422	10 x 12 cm	10	1942792
603424	20 x 30 cm	5	
603423	15 x 15 cm	10	

ABSORBENTE, FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL (PVA)**10****EXUFIBER****PRODUCTO**

Descripción: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA). En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el ambiente óptimo para la cicatrización. Gran poder de integridad (permite retirarlo en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención. Promueve el debridamiento autolítico por segunda intención. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. También se puede usar en heridas cavitadas.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	Medidas	Unidad de venta
709900	5 x 5 cm	10
709909	2 x 45 cm	5
709901	10 x 10 cm	10
709903	15 x 15 cm	10

BACTERICIDA, HIDROGEL CON PLATA

NORMLGEL AG

Descripción: Contiene un compuesto de plata antimicrobiano que es una barrera eficaz contra la penetración bacteriana al inhibir el crecimiento de un amplio espectro de microorganismos. No utilizar en piel.

Indicación: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso. También se puede utilizar en músculo, tendón o hueso expuesto.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta
350450	45 gr	10

HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA

12


PRODUCTO


MEPITEL ONE

Descripción: Suave lámina de contacto de silicona (Safetac), minimiza el trauma y dolor. Adaptable, sin adherirse al lecho húmedo de la herida para que pueda retirarse con facilidad y sin dañar la piel. Protege el tejido en formación y la piel sana, optimizando la cicatrización. Sella los márgenes de la herida para impedir las fugas laterales de exudado y proteger la piel de la maceración. El apósito debe traspasar 1 a 2 cm del borde de la herida.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. También puede ser usado como apósito secundario, para proteger apósitos primarios como hidrogel o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Puede permanecer en el sitio por hasta 7 días. Fijar 1-2 cm a la piel perilesional. Como apósito secundario, su cambio depende de las características del apósito primario.

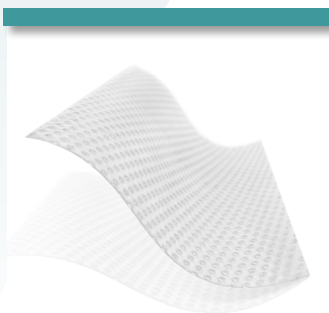

Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
289100	5 x 7,5 cm	10	1854586
289300	7,5 x 10 cm	10	
289500	10 x 18 cm	10	
289700	17 x 25 cm	5	

HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES HIPERTRÓFICAS

MEPIFORM



Descripción:

- Lámina autoadherente de silicona para el manejo de cicatrices.
- Capa con Safetac para reducir el dolor y el traumatismo en los pacientes.
- Se puede retirar, ajustar y dejar colocado durante varios días.
- Fino, flexible y discreto para que pueda llevarlo mientras realiza sus actividades diarias.

Indicación: Prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas.

Frecuencia de Uso: Usar durante las 24 horas del día, retirar durante la ducha o el baño. Los mejores resultados se darán después de 2-4 meses de tratamiento.



Código	Medidas	Unidad de venta
293199	4 x 30 cm	5
293299	5 x 7,5 cm	5
293400	10x 18 cm	5

CINTA DE FIJACIÓN, CINTA DE SILICONA

14

PRODUCTO

SafetaC®
TECHNOLOGY

MEPITAC

Descripción:


- Cinta de fijación atraumática para la piel y el vello corporal.
- Si es necesaria una inspección de la zona o una recolocación, Mepitac® puede retirarse y volverse a fijar.
- Ideal para pacientes con la piel frágil o sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación y retirada de la fijación en la misma zona, ej neonatos, pacientes en diálisis, etc. Impermeable a líquidos. Permeable a gases.

Indicación: Fijación de dispositivos médicos como drenajes, tubos, electrodos, cánulas IV y apósitos. Ofrece una protección suave para la piel cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por ejemplo tubos, mascarillas. No está recomendado en la fijación de sistemas de soporte vital.

Frecuencia de Uso: Permite su uso por varios días, hasta 10 días, manteniendo su adhesividad al reposicionar.



Código	Medidas	Unidad de venta
298300	2c m x 3 mt	1
298400	4 cm x 1,5 mt	1

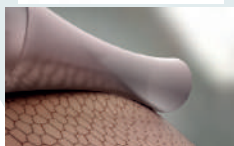

¿QUE ES SAFETAC?

Es la capa de contacto original con silicona

Características y Beneficios:

✓ **Microadhesión Selectiva:** Adhesión a piel sana y no se adhiere al lecho húmedo de la herida

- ✓ **Reducción del Dolor y Trauma**
- ✓ **Protección:** Al tejido neoformado y la piel perilesional
- ✓ **Minimiza el Riesgo de Maceración:** Sella los bordes
- ✓ **Permite Reposicionarse:** sin perder la adhesividad suave.

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA SAFETAC	Tipo Producto			Fase Cicatrización		
	Espuma	Lámina Contacto	Cinta	Inflamación	Granulación	Maduración
Nombre Comercial						
MEPILEX AG	x			x		
MEPILEX BORDER AG	x			x		
MEPILEX	x			x	x	
MEPILEX BORDER	x			x	x	
MEPILEX BORDER FLEX	x			x	x	
MEPILEX BORDER SACRUM	x			x	x	
MEPILEX BORDER HEEL	x			x	x	
MEPILEX BORDER LITE	x				x	
MEPILEX TRANSFER	x			x	x	
MEPILEX ONE		x		x	x	x
MEPIFORM		x				x
MEPITAC			x			x



MADEGOM
Medical Solutions

Fabricamos, comercializamos y distribuimos insumos y equipamiento, principalmente para el área médica.

Dentro de nuestras líneas de productos se encuentran guantes quirúrgicos, de examen y procedimiento, ropa médica desechable, kits médicos, apósitos, compresas, envoltorios y validadores para esterilización, equipos de uso médico, entre otros.

Estamos comprometidos a trabajar por una mejora conjunta y continua, entregando a nuestros clientes apoyo técnico en todas nuestras líneas de productos.



Lohmann & Rauscher



MADEGOM
Medical Solutions

Ventas e Información

MADEGOM CASA MATRIZ

Dirección	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9431 Quilicura, Santiago
Teléfono	+56 2 2435 7710
Sitio Web	www.madegom.cl

Línea Cuidado de la Heridas

Gerente	Carlos de la Roza
Email	cdelaroza@madegom.cl
Teléfono	+56 2 2435 7764 / +56 9 6303 8674
Empresa representada	Lohmann & Rauscher
Ventas Web	www.comercialhevea.cl

Distribuidores

Vitalsec	www.vitalsec.cl +56 2 2417 8808 / +56 2 2417 8796 ventas@vitalsec.cl
Stomabags	www.stomabags.cl +56 2 3210 4311 contacto@stomabags.cl
Buhos	www.buhoschile.cl +56 2 2611 3000 / +56 2 2235 8885 contacto@buhoschile.cl



MADEGOM
Medical Solutions



Lohmann & Rauscher



Tienda virtual de Convenios Marco

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA SUPRASORB® CNP

PRODUCTO

Descripción: Es fácil de aplicar y las pantallas tienen un diseño intuitivo. Solo es necesario reemplazar la bolsa de exudado y eliminar la usada, lo que reduce el espacio de almacenamiento y disminuye también los costos que esto implica. Está compuesto por:

- **Easydress**, sella las heridas en las extremidades de forma fácil y fiable.

- **Película de drenaje** (heridas - abdominal), protege órganos y estructuras delicadas.



- **Apósito de espuma y de gasa antimicrobiana.**

- Incluyen kit de curación.

Indicación: Heridas altamente exudativas, abdomen abierto.

Frecuencia de cambio: Cada 48 horas o según protocolo institucional.

Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
CH32900	Bolsa Recolectora de Exudado	250 ml	Ud
CH32901		1000ml	Ud
CH34040	Kit Plus con Gasa Antimicrobiana	S	Ud
CH34041		M	
CH34042		L	
CH34030	Kit Plus con Espuma	S	Ud
CH34031		M	
CH34032		L	
CH34901	EasyDress	S, M, L	Ud
CH39400	Film de Drenaje (heridas, abdominal)	77x60 cm	Ud
CH39395		25x20 cm	

LIMPIADOR DE HERIDAS

DEBRISOFT® PAD

Descripción: Almohadilla de fibras de poliéster con puntas anguladas, para desbridamiento de heridas agudas y crónicas superficiales; rápido, altamente efectivo, seguro y virtualmente indoloro. Permite una remoción confiable de los detritos y el exudado de la herida, al igual que descamaciones y queratosis de la piel circundantes.

Indicación: En heridas o úlceras con infección o colonización crítica.

Frecuencia de Uso: En cada curación. Previo a su uso, la almohadilla se debe humedecer con solución fisiológica tibia, aplicar con movimientos circulares.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379665	CH31222	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	10X10 cm	5 uds
	CH34323	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	13x20 cm	5 uds

HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

LOMATUELL® PRO

PRODUCTO

Descripción: Tul de poliéster impregnado en vaselina e hidrocoloide. Se puede usar por ambos lados, se puede cortar.

Indicación: En epitelización o como apósito secundario

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427640	CH30871	APÓSITO LOMATUELL PRO TUL POLIESTER FLEXIBLE CON HIDROCOLOIDE	10X10 cm	10 uds

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS

ROSIDAL® TCS

Descripción: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg en el tobillo. Es desechable, puede utilizarse por 7 días. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort porosa fabricada en espuma de poliuretano, algodón y poliamida de color blanco que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una venda de compresión cohesiva de estiramiento corto sin látex. Una vez aplicadas las dos vendas, se unirán firmemente debido a la propiedad de cohesividad que poseen.

Indicación: Úlceras venosas Tipos 3 y 4 principalmente, edema de toda la pierna. ITB >09 a 1.2.

Frecuencia de Cambio: Sistema diseñado para un sólo uso, mantiene la presión terapéutica durante 7 días, cambio según la necesidad del cambio de apósito.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363485	CH26484	VENDA ROSIDAL TCS SISTEMA COMPRESIVO 2 CAPAS DE TRACCIÓN CORTA	10cm x 6mt	Ud

BACTERICIDA, ALGINATO DE CALCIO CON PLATA IÓNICA

SUPRASORB® A + AG

PRODUCTO

Descripción: Suprasorb A + Ag tiene una alta capacidad de absorber exudado moderado a abundante, reduce la carga microbiana directamente en el lecho de la herida y por lo tanto especialmente adecuado para heridas que estén infectadas o en riesgo de infección. No aplicar en piel.

Indicación: Heridas o úlceras con exudados moderados a abundantes que están infectadas o en riesgo de infección.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379662	CH20570	SUPRASORB A+AG	5 x 5 cm	10 uds
1379663	CH20571	COMPRESA ALGINATO CALCIO	10x10 cm	10 uds

BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

SUPRASORB LIQUACEL AG®

Descripción: Apósito de carboximetilcelulosa con plata iónica al 1,1% para lesiones altamente exudativas. Es una nanotecnología de plata. Absorbe hasta 16 veces su tamaño, con absorción vertical lo que permite proteger los bordes de la herida de la maceración. Al ser retirado el apósito mantiene su integridad y puede ser removido en una sola pieza. Realizar desbridamiento quirúrgico previo, no utilizar en exudado escaso.

Indicación: En heridas y úlceras infectadas con exudado moderado a abundante tanto superficiales como profundas de distintos orígenes (lesiones por presión, úlceras del pie diabético, lesiones agudas, heridas post quirúrgicas, etc).

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
Ch42503	SUPRASORB LIQUACEL AG HIDROFIBRA PLATA	5x5 cm	10 uds
Ch42504		10x10 cm	10 uds
CH42506		2x45 cm	5 uds

REGENERADOR, APÓSITO DE COLÁGENO

SUPRASORB® C

PRODUCTO

Descripción: Está compuesto de colágeno bovino, tiene una estructura porosa con actividad capilar altamente pronunciada que permite la absorción de exudados moderados. Promueve y acelera la formación de tejido de granulación. No se debe usar en heridas o úlceras infectadas o con colonización crítica, con exudados abundantes o con necrosis. Se debe proteger el apósito con un tul de silicona, poliéster o poliuretano.

Indicación: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427638	CH20481	APÓSITO SUPRASORB C APÓSITO DE COLÁGENO P/ HERIDAS	4 x 6 x 0.8 cm	5 uds

HIDRATANTE, APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO

SUPRASORB® F

Descripción: Película de poliuretano transparente con adhesivo hipoalergénico, manteniendo un ambiente húmedo fisiológico en la herida o úlceras, promoviendo la cicatrización. Se adapta rápidamente a cualquier contorno del cuerpo, ofreciendo alto grado de confort al usarlo. Es fácil de monitorear la herida y protege el tejido epitelial recién formado de factores externos como microbios y humedad. Puede ser utilizado como apósito secundario.

Indicación: Para el tratamiento de heridas o úlceras superficiales. Utilizar con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427642	CH20461	APÓSITO SUPRASORB F TRANSPARENTE ADHESIVO ESTÉRIL	5x7 cm	100 uds
1560938	CH20463		10x12 cm	50 uds
1427641	CH20464		10x25 cm	10 uds

HIDRATANTE, HIDROGEL EN LÁMINA

SUPRASORB® G

PRODUCTO

Descripción: Apósito a base de agua y absorbente en una lámina con una cara externa con un poliuretano. Aporta humedad para un desbridamiento autolítico efectivo, remueve y retiene suavemente el tejido descamado, tejido necrótico y restos tisulares encontrados en el nivel del lecho de la herida. Alivia el dolor para el paciente. Es de fácil aplicación y manejo para el usuario. Puede aplicarse más allá del borde de la herida, siempre que la piel no esté macerada.

Indicación: En todo tipo de herida o úlcera con colonización baja y exudado bajo.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1566105	CH33631	APÓSITO SUPRASORB G LÁMINA DE GEL ESTÉRIL	10x10 cm	5 uds

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

SUPRASORB® P SENSITIVE

Descripción: Apósito a base de poliuretano con una cubierta de silicona. La construcción de tres o cuatro capas facilita la gestión dinámica de fluidos para proporcionar un ambiente húmedo óptimo para la herida. La suave capa de silicona se puede levantar y reposicionar sin perder su adherencia. Aplicar sobrepasando 2cm el borde de la lesión.

Indicación: Colonización baja con exudado moderado a abundante. Como prevención en la cizalla o en las LPP Tipo 1.

Frecuencia de Cambio: Cambiar cada 3 o 4 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379653	CH20407	SUPRASORB P ESPUMA ABSORBENTE ESTÉRIL	10x10 cm	10 uds
1648450	CH32441	SUPRASORB P ESPUMA SILICONADA ABSORBENTE	7.5x7.5 cm	10 uds
1648452	CH32442	ESTÉRIL	10x10 cm	10 uds
1648449	CH20415	APÓSITO SUPRASORB P ESPUMA HIDROFÍLICA SACRAL ESTERIL	18x20.5 cm	5 uds

BACTERIOSTÁTICO, APÓSITO DE PHMB

SUPRASORB® X + PHMB

Descripción: Biocelulosa con 0,3% de PHMB, actúa contra un amplio espectro de gérmenes, tales como SARM y ERV y algunos hongos. Si la herida está con exudado escaso, hidratar con hidrogel.

Indicación: Todo tipo de heridas y úlceras con colonización crítica con exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363174	CH20541	APÓSITO SUPRASORB X + PHMB ANTIMICROBIANO HIDROBALANCE	9x9 cm	5 uds
1648444	CH20540		5x5 cm	5 uds

SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

VARICEX® S

Descripción: Es un vendaje inelástico, desechable, que entrega 20 mm Hg de compresión a nivel del maléolo cuando el paciente está deambulando. Está compuesta por una venda de gasa de viscosa/poliamida impregnada con pasta de zinc blanca, con elasticidad tanto a lo largo como a lo ancho. Se aplica húmeda en la extremidad afectada, transformándose en una compresión semirígida cuando se seca. Aplicar con el pie en 90 grados. Se puede cortar el largo si sobra. Aplicar con sobreposición 50-50.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 2,3 y 4 Mixtas, con edema de toda la pierna o cuando hay infección en la úlcera venosa.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días, pero el apósito primario utilizado le dará la frecuencia de cambio.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363483	CH20632	VENDA VARICEX ÓXIDO DE ZINC BOTA DE UNNA	10 cm x 10 mt	10 uds

BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

VLIWAKTIV® AG

PRODUCTO

Descripción: Compuesto por plata metálica (bactericida) y carbón activado el que permite absorber el exudado y neutralizar el olor. No cortar porque partículas de carbón activado podrían penetrar en la herida y teñir la piel. Si el exudado es escaso, hidratar la lesión con hidrogel. Se puede aplicar por cualquiera de las 2 caras.

Indicaciones: Heridas o úlceras con exudado abundante con infección.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 o 48 horas.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363178	CH20700	VLIWAKTIV AG CARBÓN ACTIVADO + PLATA	6.5x10 cm	10 uds
1363182	CH20701		10x10 cm	10 uds
1648446	CH20704		10x20 cm	10 uds

ABSORBENTE

VLIWASORB®

Descripción: Está compuesto internamente por un poliacrilato de sodio unido a una lámina de celulosa la que va en contacto con la lesión, esta composición presenta la ventaja de evitar el resecamiento del lecho de la herida, presenta una capa externa libre de látex. Los polímeros superabsorbentes absorben muchas veces su propio peso en líquidos. Funciona muy bien bajo vendajes de terapia compresiva.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según cantidad de exudado de la herida.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363186	CH24501	VLIWASORB APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN	10x10 cm	10 uds
1363188	CH24502		10x20 cm	10 uds
1427639	CH24503		20x20 cm	10 uds



Salud de
la piel

Megalabs

Cuidado avanzado de heridas

Guía de insumos clínicos



Megalabs
Somos bienestar

Poder para los profesionales clínicos mediante el apoyo individualizado a lo largo de todo Chile

- Especialistas en productos para la salud de la piel
- Empaque educativo
- Medline University
www.medlineuniversity.com/medline/ghi-educational-series



- Línea de ayuda sobre salud de la piel
Diana Becerra, Cel: +56932428233
Horario: de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 hrs
- Herramienta de evaluación de heridas NE1
- Soluciones para la salud de la piel
- Pautas para el cuidado de heridas y la piel
- Videos en línea de aplicación de los productos
www.medline.com/awcvideos
- Guía de referencia de bolsillo para el cuidado
- Plataforma digital para la salud de la piel

Información para pedidos

- 🗨️ Contacto: **Diana Becerra**, Enfermera Especialista de producto cuidado avanzado de heridas
- 📞 Cel: +56932428233
- ✉️ Correo: dbecerra@megalabs.cl
cl-ventas@megalabs.cl
- 🛒 www.megaplace.cl

LIMPIADOR DE PIEL

Skintegrity®

PRODUCTO

3

Descripción: Está especialmente formulado con una solución suave a base de tres surfactantes: polisorbato 80, cocoanfodiacetato disódico y laurilglucósido que limpian suavemente la piel. Los surfactantes son tensoactivos que desprenden la suciedad. El envase presenta una boquilla que puede graduarse para aerosol o chorro.

Indicación: Limpieza de la piel en pacientes con heridas infectadas, con colonización crítica o colonización baja o pieles epitelizadas sucias. También se puede utilizar para soltar los apósitos primarios o secundarios adheridos en las heridas.

Frecuencia de uso: En cada curación



International
Product
Corporation
website



Folleto
Skintegrity®

ID CM

Medidas

Empaque

MSC600

Botella con Atomizador, 236 ml

6 botellas por caja

BACTERIOSTÁTICO, MIEL GRADO MÉDICA

THERAHONEY®

Descripción: Apósito a base de miel de Manuka. Posee una alta osmolaridad, lo que favorece el desbridamiento osmótico de las heridas con tejido esfacelado o necrótico, además es bacteriostático, inhibiendo el desarrollo de los microorganismos en las heridas. Es de fácil aplicación y remoción sin causar traumas en la lesión. No usar en personas con alergia a la miel. No usar en pacientes menores de 12 meses. El apósito se presenta en diferentes presentaciones, gel, tul, espumas, el que se elije según exudado de la herida.

Indicación: En heridas y úlceras con colonización crítica y depende de la cantidad de exudado será el tipo de apósito con miel de Manuka que se aplicará.

Frecuencia de cambio: Cambiar cada 3 a 4 días



Código	Medidas	Unidad de venta
MNK005	Gel, pomo de 14grs	10/caja
MNK0015	Gel, pomo de 42grs	10/caja
MNK087	Lámina, (10.1 x 12.7 cm)	10/caja
MNK0082	Lamina (5x5 cm)	10/caja

BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

OPTICELL® Ag⁺

PRODUCTO

5

Descripción: Apósito de hidrofibra (carboximetilcelulosa) que contiene quitosano y plata iónica. El quitosano es un polisacárido antimicrobiano que junto a la plata iónica que es un bactericida, le confieren al apósito el efecto bactericida. La hidrofibra absorbe el exudado y forma un gel gelificante. El apósito solo se aplica en la herida y se puede cortar.

Indicación: Aplicar en heridas con infección con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta
MSC9845EP	LAMINA AG 10X12CMS	10/caja
MSC7844EP	LAMINA AG 10X11 CMS	10/caja

PROTECTOR CUTÁNEO

SUREPREP®

Descripción: Película líquida transparente, transpirable y sin ardor, que forma una barrera de protección persistente sobre la piel a base de polímeros y plastificante. La barrera protege contra adhesivos, humedad y fluidos corporales. Seca rápidamente (30 segundos). Facilita la adhesión de los adhesivos. Aplicar a 10 o 15 cms. de distancia, dejar secar 30 segundo, aplicar máximo 2 puff en el mismo lugar.

Indicación: En pieles eritematosas o maceradas, en lesiones periostomales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo y dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI). Adhesivos de uso sanitario (MARSI) y por fricción o roce.

Frecuencia de uso: Cada 72 horas o en cada curación



Código	Medidas	Unidad de venta
MSC1605	Toallitas 1ml	25/caja
MSC1610	Hisopo 1ml	25/caja
MSC1528	Aerosol 28 ml	12/caja
MSC1651	Spray removedor 50ml	24/caja

PROTECTOR CUTÁNEO

MARATHON™

Descripción: Es una película protectora a base de cianoacrilato, producto que es líquido con propiedades adhesivas, creando una fuerte película protectora. Esta fuerte película se crea cuando la base de cianoacrilato entra en contacto con la humedad de la superficie de la piel. Cuando el cianoacrilato se polimeriza en la superficie de la piel, el producto permanece en la piel y no se evapora al ser aplicado. Pasar el aplicador por donde se desee proteger. De uso individual.

Indicación: En pieles eritematosas o maceradas, en lesiones periostomales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo y dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI). Abrasión por el adhesivo de uso sanitario (MARSI) y por fricción o roce.

Frecuencia de uso: Cada 72 horas o en cada curación.

**Cómo funciona**

Instrucciones de uso Video



Brochure PDF

Código	Medidas	Unidad de venta
MSC093001	Aplicador 1.5 g	5/caja
MSC093005	Aplicador 0.5 g	10/caja

BACTERICIDA, GEL CON PLATA IÓNICA

SILVASORB®

Descripción: Hidrogel amorfo con plata iónica. Al aplicarlo colocar sobre éste un apósito como tul de silicona o poliéster para que el producto se mantenga en la herida y no sea absorbido por el apósito secundario. Tubo de 7 gramos.

Indicación: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso. Se puede aplicar en hueso o tendón infectado.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta
MSC93025EP	Gel 7.0 g	25/caja
MSC9301EP	Gel 42 g	12/caja

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

9

PRODUCTO

OPTIFOAM[®] GENTLE

Descripción: Es un apósito de espuma de contacto con silicona fina. Esta compuesto por 5 capas, una externa de poliuretano, permeable al vapor de agua y al oxígeno, en el centro tres tipos de espuma de hidropolímeros ultra-absorbente, con núcleo hidrofílico gelificante, capaz de transformar el fluido en gel y una capa de silicona que va en contacto con la lesión. No se recomienda cortar. Aplicar unos 2cm. perilesional a la herida.

Indicación: Como apósito primario en heridas con colonización baja con exudado moderado a abundante. Para prevención de la cizalla y fricción. También se puede utilizar como apósito secundario.

Frecuencia de cambio: Cada 72 horas como apósito primario, cada 7 días para la prevención de la cizalla.



Instrucciones
de uso VIDEO



Brochure PDF

Código	Medidas	Unidad de venta
MSCEX33EP	7.6 x 7.6 cm	10/caja
MSCEX44EP	10 x 10 cm	10/caja
MSC9644EP	10 x 10 cm	10/caja
MSCEX77EP	Sacro 18 x 18 cm	5/caja
MSC1200B	Talón 23 x 23 cm	10/caja

HIDRATANTE DE PIEL, PRODUCTOS BOTÁNICOS

REMEDY® HYDRAGUARD®

Descripción: Descripción: Es una crema que esta compuesta por una mezcla de ingredientes botánicos que incluyen soja, algas verdeazuladas, té verde y extracto de clavo. Contiene además 24% de silicona y oleosomas - aceites de cártamo encapsulados de forma natural que liberan sus aceites naturales con el tiempo. Esta formulación patentada de nutrientes y antioxidantes, hidrata y nutre la piel para ayudarla a mantener su equilibrio natural.

Indicación: En pieles sanas, descamadas o pigmentadas

Frecuencia de uso: Cada 12 horas.



Instrucciones
de uso VIDEO



Brochure PDF

Código	Medidas	Unidad de venta
MSC092532UNSC	Crema 59ml	24 uds/caja
MSC092534UNC	Crema 118ml	12 uds/caja

REGENERADOR, COLÁGENO

PURACOL®

Descripción: Apósito compuesto por 100% de colágeno natural Tipo I. Es biodegradable. Solo aplicar en la úlcera, en la piel no actúa. Aplicar sobre el apósito un tul de silicona o un poliéster o un transparente adhesivo para que el apósito secundario no se adhiera a la lesión, ya que el colágeno se integra a la lesión. Al realizar la curación, no sacar la capa gelatinosa que se forma, solo retirar lo que esta suelto.

Indicación: Aplicar solo en la úlcera con colonización baja, con exudado escaso- moderado. En úlceras con colonización crítica, se puede aplicar en los bordes que tienen 100% con tejido de granulación.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días



Código	Medidas	Unidad de venta
MSC9945EP	10X12 cm	10 uds/Caja
MSC8622EP	5x5 cm	10 uds/Caja

SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

UNNA-Z™

Descripción: Venda semielástica impregnada en pasta de óxido de zinc en forma uniforme, existe con y sin calamina. La venda favorece el retorno venoso, proporciona una baja compresión. Aplicar después de la aplicación del apósito primario.

Indicación: En úlceras venosas con edema, úlcera venosa mixta, úlceras venosas con infección. Las úlceras venosas deben tener ITB >0,5.

Frecuencia de cambio: Máximo 7 días, pero dependerá de la frecuencia de la curación para su cambio.



Código	Medidas	Unidad de venta
NONUNNAS130	7.6 x 9.1 cm elástica	12/caja
NONUNNAS40	102 x 9.1 cm elástica, con calamina	12/caja

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS

13

PRODUCTO

TwoFlex™

Descripción: Sistema compresivo de alta compresión (35-40mmHG). Esta compuesta por dos capas, la primera la que va en contacto con la piel, esta compuesta por espuma flexible, la que proporciona protección a la piel, no entrega compresión. La segunda capa es la venda de compresión, es de estiramiento corto, cohesiva y se debe aplicar al máximo de estiramiento. El sistema trae una media de nylon para proteger el vendaje en la noche al dormir.

Indicación: Úlceras venosas en especial las Tipo 3 y 4 y linfedema. Para su aplicación el ITB debe ser normal (0,9 a 1,2).

Frecuencia de cambio: Máximo 7 días, pero dependerá de la frecuencia de la curación para su cambio.



Código

Medidas

Unidad de venta

MSC6800

Kit (10cmx3.1mts) no estirada

8 kits x caja

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS, ABSORBENTE

ULTRASORBS®

Descripción: Sabanilla ultra absorbente de 75 x 91cm. Protege la piel del paciente favoreciendo la prevención de DAI y a la vez protege la ropa de cama. Posee un núcleo superabsorbente que le permite manejar hasta 1000 cc. de fluidos. Capa posterior resistente a la humedad, pero permeable al paso de aire. No está hecho con látex de caucho natural. Permite movilizar al paciente y resiste hasta 159 Kgrs.

Indicación: En pacientes politraumatizados, postquirúrgicos con elevados nivel de fluidos, heridas muy exudativas (como refuerzo de los apósitos secundarios).

Frecuencia de cambio: Cada 12 horas o cuando el producto no este seco al tacto.



Código	Medidas	Unidad de venta
EXTRASRB3036X	75 x 91 cm	70 uds/caja

HIDRATANTE, GEL AMORFO

PluroGel®

Descripción: Es un gel amorfo, esta compuesto por agua y micelas, esta última le da la consistencia de gel y ayuda a mantener la estructura. Aplicar solo en la herida y necesitará un apósito de silicona o poliéster para protegerlo.

Indicación: En heridas y úlceras con colonización baja y exudado escaso. Se puede utilizar para el desbridamiento autolítico con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Cambios cada 72 horas.



Código	Medidas	Unidad de venta
PGL007	0.25 onzas (7 g), pomo	50/caja
PGL020	0.70 onzas (20 g), pomo	35/caja
PGL050	1.75 onzas (50 g), frasco	24/caja
PGL050TUBE	1.75 onzas (50 g), pomo	12/caja
PGL400	14.1 onzas (400 g), frasco	6/caja

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

ABINTRA®

Descripción: Suplemento nutricional especializado para la reparación de tejido y cicatrización de heridas. Contiene arginina y glutamina para apoyar la síntesis de colágeno. Proteína de suero de leche que apoya la síntesis proteica. Vitaminas A, C y B12 más cobre y zinc. Antioxidantes Vitamina E y Selenio. Sin azúcar añadida.

Preparación:

Vía oral: Mezclar 1 sobre (27grs) en 210 ml de agua. Agitar y consumir.

Vía enteral: Mezclar 1 sobre (27grs) en 60 ml de agua. Agitar y consumir.

Refrigere la porción no usada y consumir dentro de las 24 horas.

Indicación: En general en toda úlcera de larga data de más de 5 cm de extensión como úlceras por presión, úlceras venosas, úlcera del pie diabético, quemaduras.

Frecuencia de uso: 1 a 2 sobres al día por 15 días.



Código	Medidas	Unidad de venta
00107000365	Sobre de 27 g	Caja x 30 sobres



Urgo Medical es una empresa global de cuidado de heridas que ofrece una gama de innovadores apósitos, vendas de compresión, entre otros productos, diseñados para mejorar la cicatrización de las heridas y la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra misión consiste en aportar soluciones innovadoras y eficaces para la cicatrización de heridas que faciliten el trabajo de los profesionales de la salud y mejorar la calidad de vida de las personas con heridas.

Nuestros productos cuentan con tecnologías patentadas, seguras y efectivas para el tratamiento de personas con heridas. Contamos con un robusto respaldo científico, con mas de 300 publicaciones y siendo también comprobados sus beneficios en la vida real.



www.flowcode.com/page/urgomedicalchile



info@cl.urgo.com



+56 9 56891626

Visita nuestro
Catálogo



Desde 2017, Urgo Medical distribuye directamente a instituciones públicas y privadas con la razón social Sociedad Importadora Optivision Limitada.

vashe®
wound solution

Solución limpiadora
Antibiofilm



UrgoClean Ag

Apósito Bactericida
Antibiofilm

UrgoStart
Treatment Range

Apósito modulador de
Metaloproteínas



UrgoK2

Sistema Compresivo
Multicomponente

Corpitol

Ácido Graso
Hiperoxigenado



Nuestra red comercial y de apoyo
clínico da cobertura a todo Chile.

Descarga nuestro listado de insumos
en el siguiente QR.

Visita nuestra Web



LIMPIADOR DE HERIDAS

vashe® wound solution

3

PRODUCTO

Descripción: Es una solución limpiadora natural de Ácido Hipocloroso (HClO) en una concentración de 330 ppm. que consigue una limpieza en un corto tiempo de acción, de amplio espectro y no citotóxica. Su formulación patentada con Acido Hipocloroso como su único principio activo, presenta un pH patentado 5.5 el mismo que la piel, el cual favorece la cicatrización.

Indicaciones: Para limpieza de todo tipo de heridas o úlceras, incluyendo lesiones en mucosas, independiente de su nivel de carga microbiana. Empapar una gasa no tejida en solución limpiadora Vashe y aplicar sobre el lecho de la herida. Dejar actuar por 3 a 5 minutos y continuar con el cambio de apósito. No requiere enjuague.

Frecuencia de uso: Aplicar en cada curación.



Nombre Urgo	Presentación	Uds.	Id
VASHE Solución limpiadora de Ácido hipocloroso y pH 5.5	118 ml	24	VA000312
	250 ml	12	VA000313
	1 lt	6	VA000322

REGENERADOR, INHIBIDOR DE LA METALOPROTEASA

UrgoStart

Descripción: La gama UrgoStart se compone de la tecnología patentada TLC – NOSF (partículas de CMC, componentes lipídicos y factor nano-oligosacárido, también llamado octasulfato de sacarosa) que ha demostrado reducir el tiempo de cicatrización en estudios de alta evidencia, gracias a su mecanismo de acción: reducción del exceso de Metaloproteasas de matriz lo que disminuye la destrucción del tejido, y por consecuencia promoción de la angiogénesis, restaurando el proceso de cicatrización. Se puede recortar y adaptar según la lesión, compatible con otros apósitos secundarios y sistemas compresivos.

Indicaciones: En úlceras con colonización baja con exudado bajo a moderado. Ejemplo: Úlceras de pie diabético, úlceras vasculares y úlceras por presión.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.



Nombre Urgo	Presentación	Tamaño	Id
UrgoStart Contact	Tull flexible de poliéster	10x10 cm 5x7 cm	UR550278 UR550276
UrgoStart Plus	Fibras poliabsorbentes	10x10 cm	UR552302

BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

UrgoClean Ag

5
PRODUCTO

Descripción: Gracias a su exclusiva composición de fibras poliabsorbentes y matriz TLC-Ag (partículas de CMC, componentes lipídicos y sulfato de plata), combate la infección local de manera integral con una acción combinada antimicrobiana, antibiofilm y de limpieza completa por medio de un desbridamiento electrostático, manteniendo el ambiente húmedo y una retirada atraumática.

Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida. Al retirar el apósito se puede apreciar un gel que es debido a la propia gelificación de las fibras poliabsorbentes en contacto con el exudado, necesario para su función de limpieza.

Indicaciones: Úlceras y heridas exudativas con infección local o con sospecha de biofilm.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo
UrgoClean Ag	Apósito lípidocoloide de Fibras poliabsorbentes con plata	10 x 10 cm	UR551978



ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA


UrgoClean

Descripción: Las fibras poliabsorbentes proporcionan una limpieza completa para garantizar la cicatrización de la herida. Al mismo tiempo cuenta con la matriz cicatrizante TLC* la cual mantiene el ambiente húmedo, favorece la proliferación de fibroblastos y permite una retirada atraumática e indolora para el paciente. Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado o abundante.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.



Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo
UrgoClean	Apósito Lípidocoloide desbridante de fibras poliabsorbentes	10 x 10 cm 6 x 6 cm	UR506446

BACTERICIDA, TUL CON PLATA IÓNICA

7

PRODUCTO

UrgoTul Ag/Silver

Descripción: Es una malla de contacto con acción antimicrobiana efectiva que combate la infección local por medio de la acción de la matriz cicatrizante TLC – Ag, compuesta por partículas de carboximetilcelulosa, componentes lípidicos y sulfato de plata, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora, mientras ejerce su acción antimicrobiana de amplio espectro.

Indicación: Tratamiento local de heridas crónicas (úlceras vasculares, úlceras por presión y úlceras de pie diabético) y agudas (quemaduras parciales, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas post-quirúrgicas) en riesgo o con signos de infección local.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.



Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo
UrgoTul Ag	Tul lípidocoloide con plata	10 x 12 cm	UR508393
		15 x 20 cm	UR508394

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS



Descripción: Sistema de compresión multicomponente, compuesto de una venda de tracción corta K-Tech que actúa cuando el paciente está en movimiento y otra de tracción larga cohesiva K-Press que actúa en reposo. Gracias a sus indicadores de presión en ambas vendas, se asegura la presión terapéutica de 40 mmHg. en el tobillo, al mismo tiempo que guía el correcto posicionamiento del vendaje. Utilizar el tamaño adecuado en función de la circunferencia del tobillo (18-25 cm. / 25-32 cm.). Aplicar primero la venda K-Tech (blanca), seguida de la venda K-Press (café).

Indicaciones: Úlceras venosas, edema venoso y linfedema.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado e indicaciones del apósito primario. Mantiene la compresión terapéutica efectiva hasta por 7 días.



Nombre	Presentación	Talla	Id Urgo
UrgoK2	Sistema Compresivo Multicomponente con indicadores de presión	18 x 25 cm	UR191584
		25 x 32 cm	UR191585

ACEITE HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPOXIGENADO

9

Corpitol

PRODUCTO

Descripción: Solución tópica compuesta de ácidos grasos esenciales hipoxigenados en un 99% (un 60% de ácido linoleico), vitamina E (Tocoferol) y perfume de anís, y libre de alcohol. Corpitol permite reforzar la resistencia de la piel, proteger y evitar la deshidratación cutánea, estimular la renovación celular de la piel y favorecer la microcirculación preservando la oxigenación de los tejidos.

Indicación: Tratamiento y prevención de lesiones por presión, pieles secas y deshidratadas, pieles frágiles, pigmentadas, pieles con poca resistencia cutánea y deterioro trófico de la piel.

Frecuencia de uso: 1 a 2 pulverizaciones en las zonas de la piel a tratar o prevenir, y frotar suavemente con las puntas de los dedos hasta su completa absorción. Repetir hasta 3 veces al día, según nivel de riesgo del paciente.



Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo
Corpitol	Aceite de ácidos grasos esenciales hipoxigenados con Tocoferol	20 ml	UR504427

HIDRATANTE, TUL LIPÍDICO

UrgoTul

Descripción: Formado por una matriz cicatrizante TLC, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora. Se encuentran en formato de tul sintético, espuma microadherente y espuma superabsorbente con borde siliconado (ambas con absorción vertical).

Indicación: Está indicado para el tratamiento de heridas agudas y úlceras en fases de granulación y epitelización, como también para el manejo de la Epidermólisis Bullosa (EB). Los formatos de espuma pueden ser utilizados también como apósitos secundarios para control de exudado y en la prevención de lesiones por presión.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	Id Urgo
UrgoTul	Tul lipídocoloide de poliéster	5 x 5 cm	UR508537
		10 x 10 cm	UR508538
UrgoTul Absorb	Espuma lipídocoloide microadherente	10 x 10 cm	UR503899
UrgoTul Absorb Border	Espuma lipídocoloide con borde adhesivo de silicona	13 x 13 cm	UR550867
		20 x 20 cm (Sacro)	UR550869



UrgoTul Absorb
UrgoTul Absorb
Border




HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Avanzando en el cuidado de la salud por 200 años.

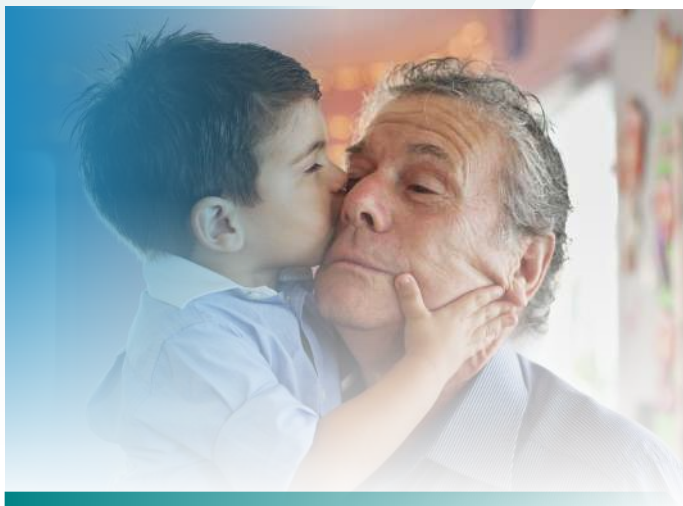

Trabajamos para llevar la salud más allá y así crear un impacto positivo en tantas vidas como sea posible.

*Para llevar la salud hacia adelante, tenemos pasión
en lo que hacemos.*

*Nos esforzamos cada día para ir más allá en la salud,
por esto, ya seas profesional sanitario o un apasionado
por la salud, estamos abiertos a tus preguntas,
comentarios y opiniones.*



Despacho a todo Chile



www.latam.hartmann.info



hartmann-chile@hartmann.info



+56 2 3324 0260

DESBRIDANTE HIPEROSMÓTICO

HYDROCLEAN

PRODUCTO

3

Descripción: Apósito hiperosmótico con función desbridante. Esta compuesto en su interior por solución de Ringer, el que permite el desbridamiento atraumático e hiperosmolar, también en su interior contiene poliacrilato super absorbente, el que actúa cuando hay exudado moderado a abundante y esta cubierta por una capa de silicona que va en contacto con la herida, la que permite mantener el ambiente húmedo fisiológico cuando presente exudado escaso. No cortar ni dañar mecánicamente. Cubrir la piel circundante con protector cutáneo. Durante el tratamiento puede haber hiperhidratación reversible en la zona de los bordes de la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado escaso, moderado o abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 72 hrs.



Producto	Dimensiones	Unidad de venta	Referencia Hartmann
Hydroclean	4cm round	Caja 10 unidades	609 220
	4x8cm oval	Caja 10 unidades	609 222
	5.5cm round	Caja 10 unidades	609 224
	7.5x7.5cm	Caja 10 unidades	609 226
	10x10cm	Caja 10 unidades	609 228

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON HIDROGEL

HYDROTAC

Descripción: Espuma de poliuretano con matriz de hidrogel que incorpora la nueva tecnología AcquaClear con capacidad de absorber el exudado de la lesión, mientras aporta humedad que favorece la migración de células y una cicatrización mucho más rápida.

El apósito debe sobrepasar uno a dos cm desde el borde de la herida. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 horas.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann
HydroTac	6 cm round	685849
HydroTac	10 x 10 cm	685832
HydroTac	10 x 20 cm	685833
HydroTac	8 x 8 cm	685810
HydroTac	12,5 x 12,5 cm	685815
HydroTac	22 x 22 cm	685827
HydroTac	18 x 18,5 cm	685624

LIMPIADOR DE PIEL, ESPUMA LIMPIADORA

MOLICARE SKIN

PRODUCTO

Descripción: Espuma de limpieza para piel perilesional, contiene creatina, butano, ácido láctico, perfume y ácidos grasos esenciales y mantiene el PH 5.5 en la piel. Controla la carga bacteriana de la piel expuesta a bacterias de la flora transitoria provenientes de lesiones crónicas, agudas y pacientes incontinentes, manteniendo intacta la humedad, el manto ácido y la función de barrera protectora de la piel.

Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la lesión a 20 cm de distancia, dejar actuar y retirar los excedentes sin agua ni jabón.

Indicaciones: Limpieza rápida y suave de la piel perilesional en heridas o úlceras o para la prevención de lesiones cutáneas por humedad y exudado.

Frecuencia de Uso: En cada curación.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann
Molicare Skin Espuma de limpieza	400 ml	995081
Molicare skink espuma de limpieza mini	35 ml	995042

CURETAS PARA DESBRIDAR

PEHA INSTRUMENT

Descripción: Curetas desechables de acero inoxidable de grado médico de 4 mm de diámetro y para un solo uso. Permiten desbridar de manera segura, rápida y atraumática.

Usar en conjunto al uso de apósitos que induzcan el desbridamiento autolítico o hiperosmótico. No re esterilizar. Son desechables, de un solo uso.

Indicaciones: Desbridamiento de tejido esfacelado y/o necrótico.

Frecuencia de Uso: En heridas o úlceras con infección se debe utilizar en cada curación. En colonización crítica, utilizar cuando exista más de 25% de tejido esfacelado o necrótico.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann
Peha Instrument: Cureta Fox 14,5cm	4 mm	991013

ABSORBENTE

7

PRODUCTO

ZETUVIT PLUS SILICONE

ZETUVIT PLUS

Descripción: Apósito que esta compuesto en su interior por celulosa y poliacrilato superabsorbente, que absorbe y retiene el exudado. Existe con y sin silicona. El Zetuvit Plus Silicone contiene una capa de silicona que va en contacto con la herida, la que permite una fácil aplicación y retirada atraumática y mantener un ambiente húmedo fisiológico en la lesión. No necesita un apósito secundario. En pieles maceradas aplicar previo un protector cutáneo, en pieles sanas, pigmentadas o descamadas, la silicona ayudará a su hidratación. El Zetuvit Plus que no tiene silicona, se recomienda como apósito secundario cuando existan exudado moderado a abundante. No cortar ni dañar mecánicamente.

Indicación: En colonización baja con exudado moderado a abundante. Ambos se pueden utilizar como apósitos secundarios.

Frecuencia de cambio: Como apósito primario cambiar cada 3 a 4 días, como secundario, el apósito primario indicara la frecuencia de cambio.



Producto	Dimensiones	Almohadilla	Unidad de venta	Referencia Hartmann
Zetuvit Plus	10x10 cm	-	Caja 10 uds	413710
Zetuvit Plus	8x8 cm	6x6 cm	Caja 10 uds	413810
Silicone	12,5x12,5 cm	10,5x10,5 cm	Caja 10 uds	413820
Zetuvit Plus	10x10 cm	5x5 cm	Caja 10 uds	413910
Silicone	12,5x12,5 cm	7x7 cm	Caja 10 uds	413920
Border	*Otras medidas disponibles.			

LIMPIADOR DE HERIDAS

HYDROCLEAN SOLUTION

Descripción: Solución para la limpieza e irrigación de las heridas. Está compuesto por Agua, Poloxamero y Polihexanida al 0.1%. El Poloxamero es un surfactante que actúa en las heridas como tensoactivo y la Polihexanida es un bactericida. El producto se debe aplicar en la herida con una gasa no tejida dejando actuar por 10 a 15 minutos

Indicaciones: En heridas y úlceras con infección y con colonización crítica. En colonización baja, aplicar solo por 5 minutos. Si presenta hueso expuesto, proteger hueso con hidrogel, antes de aplicar el producto.

Frecuencia de uso: Utilizar en cada curación.



Producto	Dimensiones	Unidad de venta	Referencia Hartmann
Hydroclean Solution	350 ml	Caja 6 unidades	531999



Nuevas oficinas



En Promedon proveemos soluciones de alta tecnología y efectividad para el tratamiento avanzado de heridas, las que ponemos al alcance de los y las profesionales de la salud y sus instituciones. Las marcas que representamos son **Covalon**, **Genadyne**, **Integra Tissue Technologies**.

Gracias al uso de los productos de nuestro portafolio podrán lograr menores tiempos de recuperación para sus pacientes, mejorando antes y de mejor manera, su calidad de vida.

Covalon, Genadyne e Integra, tres grandes tecnologías para curación avanzada al alcance de todos.



Contacto Ventas: +56 (2) 2401-900



ventas@promedon.com

Representante de Ventas

Simón Contreras (+569) 666 96197

simon.contreras@promedon.com

Natalia Castro (+569) 876 87605

natalia.castro@promedon.com

Ana Monsalves (+569) 787 71549

ana.monsalves@promedon.com

REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS

3

PRODUCTO


covalon
TECHNOLOGIES LTD.

COLACTIVE PLUS

Descripción: Apósito de colágeno parcialmente desnaturado que forma una matriz que promueve el crecimiento celular junto con la acción del EDTA que actúa sobre el Zinc y así inhibe las metaloproteasas. Además, mantiene el ambiente húmedo por la acción de la carboximetilcelulosa y el alginato. Se puede recortar, se adapta a la lesión, se reabsorbe, solo aplicar en la herida, en la piel no actúa.

Indicación: Pacientes con heridas crónicas, estancadas, con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de la institución y requiere un apósito secundario.

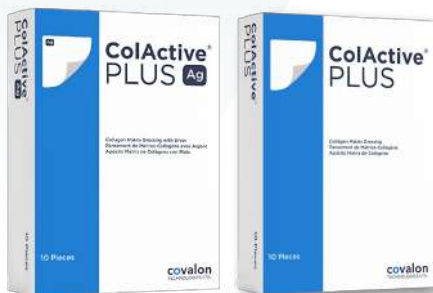

Producto	Medidas	Código Producto
Colactive Plus	5 x 5 cms	CV-5550220
Colactive Plus	10 x 10 cms	CV-5550440

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

COVAWOUND

covalon
TECHNOLOGIES LTD.

Descripción: Apósito de espuma hidrofílica pentalaminar de suave adherencia con silicona, que cuida la piel circundante. Capas altamente absorbentes: capa de contacto de silicona que no se adhiere a la superficie de la herida, centro de espuma de poliuretano, una capa no tejida y otra de fibras absorbentes, más una capa exterior de poliuretano semipermeable que traspasa el vapor de agua, pero que actúa de barrera a microorganismos y otros líquidos.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante, para prevención de LPP.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de su institución.



Producto	Medidas	Código Producto
Covawound Talonera Silicona 2026	20 x 26 cms	CV-1012026
Covawound Espuma Silicona Sacro	15 x 17 cms	CV-1051517
Covawound Espuma Talonera Copita	10 x 13 cms	CV-2001013

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

GENADYNE

GENTILTAC

PRODUCTO

Descripción: Lámina de contacto estéril con una capa superior impermeable de poliuretano y una capa de gel de silicona transparente con orificios de 2 mm que favorece el traspaso del exudado, mínimo riesgo de maceración, otorgando protección manteniendo intacto el lecho de la herida, se ajusta a los contornos, es flexible. No deja residuos, es recortable y de retiro atraumático.

Indicación: Todo tipo de heridas o úlceras y abrasiones con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Puede permanecer hasta 7 días o según protocolo de su institución.



Producto	Medidas	Código de producto
Gentiltac	5 x 7.5 cms	GN-440203
Gentiltac	10 x 7.5 cms	GN-440304

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

GENADYNE

Descripción: Los equipos Genadyne dan la solución al tratamiento a diversos tipos de heridas.

- Equipo domiciliario UNO PLUS para heridas con menor exudado con canister de 200 cc y 300 cc.
- Equipo XLR8 PLUS. para heridas altamente exudativas con alternativa de canister de 200-400-600-800 y 1.100 cc.
- Equipo con instilación DUO. Para heridas que puedan requerir instilación de Medicamentos, suero, limpiador etc. No requiere uso de cassette para la instilación.

Nuestros equipos poseen una gran variedad de Espumas, como kit espuma normal, espuma plata, espuma PVA y kit abdominal etc.





CardinalHealth™



¡Somos tus alas!

Cardinal Health™ ofrece una cartera completa de productos para el manejo avanzado y tradicional de heridas y manejo de la piel. Creemos que la salud de la piel es una misión crítica, estamos aquí con productos y educación para apoyarlos en el cuidado de sus pacientes.





www.hospitalia.cl



ventas@hospitalia.cl



+562 2570 6100



Américo Vespucio 1565
Quilicura, Santiago, Chile

Zona	Representante de Ventas		
RM	Paula Vera	+56 9 34456815	pvera@hospitalia.cl
RM	Bárbara Cid	+56 9 68342624	bcid@hospitalia.cl
RM+ V región (costa)	Victor Altamirano	+56 9 42650541	valtamirano@hospitalia.cl
RM+ V región (cordillera)	Paula López	+56 9 42423318	plopez@hospitalia.cl
ZONA NORTE	Paula Majmud	+56 9 97012304	pmajmud@hospitalia.cl
VI – VII región	Nathali Quintero	+56 9 42626422	nquintero@hospitalia.cl
VIII-XVI región	Daniela Bonavera	+56 9 34456814	dbonavera@hospitalia.cl
IX-XIV- X-XI-XII región	Cristian Henríquez	+56 9 68342655	chenriquez@hospitalia.cl

BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA HIDROFÍLICA CON PHMB

KENDALL™ AMD

PRODUCTO

Descripción: Espuma de poliuretano impregnada en antimicrobiano de PoliHexaMetileno Biguanida (PHMB) al 0.5%, no se adhiere al lecho de la herida. La espuma AMD absorbe el fluido y las bacterias de la herida, el PHMB de la espuma se activa e inhibe las bacterias absorbidas en su interior. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



Código	Descripción / Medidas	Empaque
55522AMD	2" x 2" (5 X 5 cm)	Caja X 100 uds
55535AMD	3.5" x 3" (9X 7.6 cm)	Caja x 50 uds
55544AMD	4" x 4" (10 X 10 cm)	Caja X 50 uds
55548AMD	4" x 8" (10 X 20 cm)	Caja X 50 uds
55566AMD	6" x 6" (15 X 15 cm)	Caja X 50 uds

Apósito de Espuma

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ESPUMA KENDALL™

Descripción: Espuma hidrofílica de poliuretano, ultrasuave que protege y amortigua las heridas. Fomenta granulación y epitelización. Permeable a gases, alta capacidad absorción. Estéril, hipoalergénico. Existen diferentes presentaciones.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Para prevenir zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



Código	Descripción / Medidas	Empaque
55533	Espuma Hidrofílica 7.5 x 7.5 cm	Caja x 10 uds
55535	Espuma Hidrofílica Fenestrada 8.9 x 7.6 cm	Caja x 10 uds
55544	Espuma Hidrofílica 10x10 cm	Caja x 10 uds
55548	Espuma Hidrofílica 10x20 cm	Caja x 10 uds

BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

REINFORCED GELLING FIBER + AG

Descripción: Es una almohadilla no tejida, estéril y reforzada, compuesta por alginato de calcio con un alto contenido en ácido gúlrónico, carboximetilcelulosa (CMC) y plata iónica.

Los iones de plata se liberan desde el apósito (fosfato de sodio y plata), en presencia de exudado desde la herida. A medida que el apósito absorbe exudado, el alginato forma un gel, que ayuda a mantener un ambiente húmedo para la cicatrización óptima de la herida. Se puede recortar. Aplicar solo en la herida.

Indicación: En heridas y úlceras infectadas con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1855738	RGFB45AG	Reinforced Gelling Fiber + Ag 10 x 12 cm	Caja x 10 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

6 BACTERIOSTÁTICO, GASA NO TEJIDA CON PHMB

EXCILON™ AMD

Descripción: Es un apósito fenestrado, fabricado de Polyester y Rayón (gasa no tejida) Impregnado con PoliHexaMetileno de Biguanida (PHMB) al 0.2%. Inhibe las bacterias en el apósito. Actúa sobre microorganismos Gram-, Gram+, Hongos/Levaduras. Incluidos MRSA y VRE. Presentación estéril, libre de látex, hipoalergénico. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado escaso. También útil en fijadores externos; catéteres centrales, accesos de hemodiálisis, estomas, traqueostomías, gastrostomías, tubos de alimentación.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según protocolo institucional y nivel de exudado del paciente.



Código	Descripción / Medidas	Empaque
7088	Gasa Excilon AMD 10 x 10 cm 2 uds x sobre	Cartón x 600 uds
7089	Gasa Excilon AMD Vía Venosa 5 x 5 cm 2 uds x sobre	Cartón x 1400 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

BACTERIOSTÁTICO, GASA TEJIDA CON PHMB

KERLIX AMD

PRODUCTO

Descripción: Es un apósito en presentación de rollo, elaborado de gasa 100% algodón, con 6 capas de tejido prensado. Impregnado en PHMB Polihexametileno Biguanida al 0,2% con amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. Inhibe la carga bacteriana en el apósito. En presentación estéril, hipoalergénico. Se puede cortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



Código	Descripción / Medidas	Empaque
3331	Kerlix en Rollo 11.4 cm x 3.7 mts	Cartón x 60 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

HIDRATANTE, TUL CON PETROLATO

XEROFORM

Descripción: Es una gasa tejida impregnada en petrolato y ungüento hidrofílico de Tribromofenato de Bismuto al 3%. Mantiene un ambiente húmedo óptimo en la cicatrización de las heridas y epidermis. No se adhiere al lecho de la herida haciendo más fácil el retiro. Se adapta a cualquier superficie.

Indicación: En heridas o úlceras epitelizadas o como apósito secundario para aumentar el efecto bacteriostático del apósito primario.

Frecuencia de Cambio: Cada 4 días en epitelización y como apósito secundario, según recomendaciones del apósito primario.



Código	Descripción / Medidas	Empaque
8884436400	GASA XEROFORM CON BISMUTO 5X 5 CM	Caja x 50 uds
8884432000	GASA XEROFORM CON PETROLATUM 10.16CM X 2.74M	Caja x 6 uds
8884437100	GASA XEROFORM CON BISMUTO 12.7 X 22.86CM	Caja x 12 uds
8884437201	GASA XEROFORM CON BISMUTO 2.54 X 20.32CM	Caja x 50 uds

BACTERIOSTÁTICO, ABSORBENTE MIXTO

TELFA AMD

PRODUCTO

Descripción: Apósito post-quirúrgico con pad absorbente central de poliéster denso no tejido con una base de algodón impregnado con antimicrobiano de Polihexametileno Biguanida al 0,2%, amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. La película protectora central antiadherente fija al pad central (myllar) protege la cicatriz y no se adhiere a la sutura, en el Interior la capa es de algodón, que ofrece una absorción moderada para el control de humedad de la herida.

Indicación: Con exudado bajo a moderado en cobertura de incisiones quirúrgicas, cobertura de laceraciones y abrasiones, zonas donantes, herida incisional lineal bajo drenaje.

Frecuencia de Cambio: cada 5 días o según protocolo institucional



Código	Descripción / Medidas	Empaque
7662	Telfa AMD 7.5 x 10 cm Estéril	Caja x 50 uds
7663	Telfa AMD 7.5 x 20 cm Estéril	Caja x 50 uds
7665	Telfa AMD 10 x 12 cm Estéril	Caja x 25 uds
7666	Telfa AMD 10 x 20 cm Estéril	Caja x 25 uds

HIDRATANTE, POLIÉSTER

TELFA CLEAR

Descripción: Es un apósito fabricado de poliéster microperforado, transparente no adhesivo, poroso, hipoalergénico que favorece el proceso de cicatrización. No produce dolor al retirarlo. Permite visualizar la herida a través de él. Presentación en lámina y rollo. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras, quemaduras con colonización baja y exudado escaso. También se utiliza como apósito secundario, para proteger los apósitos primarios como hidrogeles o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días como apósito primario, como apósito secundario, según características del apósito primario.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1943865	1111	Telfa Clear 10,2 x 12,7 cm	50 ea/case
	1113	Telfa Clear 30,5 x 30,5 cm	50 ea/case
	1114	Telfa Clear 30,5 x 61 cm	50 ea/case
	1115	Telfa Clear en rollo 97.5cm x 22.75m	4 ea/case

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085
 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906



**Cambiando la vida de las personas
con las que tenemos contacto**



convatec
— forever caring —



Convatec Chile



@ConvatecChile



Convatec Región Sur



Convatec Chile



www.convatecclass.cl



convatec
— forever caring —

Contacto Ventas

2

VENTAS

Región	Representante de Ventas	
I-RM	Rebeca Carrasco rebeca.carrasco@convatec.com	+56 9 6394 6563
II-RM	Danae Alarcón danae.alarcon@convatec.com	+56 9 4011 7868
III-IV	Eduardo Moreno eduardo.moreno@convatec.com	+56 9 9224 1409
V	Cristián Lisboa cristian.lisboa@convatec.com	+56 9 6193 3619
XV-RM	Viviana Iturrieta viviana.iturrieta@convatec.com	+56 9 4419 1220
RM	Natalie Arias natalie.arias@convatec.com	+56 9 33813693
VI-VII-RM	Javier Araya javier.araya@convatec.com	+56 9 4419 1221
VIII-IX-XVI	Rafael Figueroa rafael.figueroa@convatec.com	+56 9 4493 6771



www.convatec.cl



convatec.chile@convatec.com



+56 2 2840 5200



Av. Andrés Bello 2325, Oficina 8, Providencia. Santiago

Nuestras tecnologías son patentadas y poseen más de 365 evidencias clínicas, con rendimiento superior comprobado para acelerar el proceso de curación. Estamos presentes en más de 100 países.



BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

Aquacel™ Ag+

Extra

PRODUCTO

Descripción: Es un apósito suave, estéril, antimicrobiano, hecho de dos capas de carboximetilcelulosa sódica impregnadas con un 1.2% de plata iónica y fórmula antibiofilm, potenciada con EDTA y BeCl, que exponen a las bacterias a los efectos de la plata iónica destruyendo las biopelículas. Extra absorbente.

Indicación: Heridas infectadas y con riesgo de infección, con alto contenido microbiano en heridas de difícil cicatrización. Prevención y tratamiento del biofilm.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Conv. Marco
413566	5x5 cm	Caja 10 uds	Para medidas 10x10 cm:
416567	10x10 cm	Caja 10 uds	Macrozona norte: 1929331
413568	15x15 cm	Caja 5 uds	Macrozona centro: 1929332
413571	Mecha 2x45 cm	Caja 5 uds	Macrozona sur: 1929333



ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA

AQUACEL[®] EXTRA[™]

Descripción: Apósito compuesto de una doble capa de carboximetilcelulosa de sodio, cosido con hilo Tencel (con fibra de refuerzo). Absorbe grandes cantidades de exudado, creando un gel suave y cohesivo que se adapta estrechamente a la superficie de la herida mientras mantiene un ambiente húmedo que ayuda a eliminar el tejido esfacelado o necrótico (desbridamiento autolítico por segunda intención).

Indicación: Herida o úlcera con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



Código CVT	Tamaño	Presentación
420672	10 x 10 cm	Caja 10 unidades
420673	15 x 15 cm	Caja 5 unidades
420671	5x5 cm	Caja 10 unidades



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

AQUACEL™ Foam

Descripción: Apósito estéril, compuesto por una espuma hidrofílica y tecnología hidrofibra, que permite atrapar exudado, garantizando la no maceración de la piel. Presentación con adhesivo cuenta con bordes de silicona, no oclusivo, de fácil remoción, que permite visualizar la piel protegida, sin lesionarla.

Indicación: Tratamiento de heridas agudas y crónicas con colonización baja y exudado moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.

Código CVT	Tamaño	Presentación	
No Adhesivo			
420633	10x10 cm	Caja	10 uds.
420635	15x15 cm		5 uds.
Adhesivo			
420680	10x10 cm	Caja	10 uds.
420619	12.5x12.5 m		10 uds.
421579	Sacro PRO		5 uds.
422356	Talón PRO		10 uds.





PROTECTOR CUTÁNEO

ESENTA™

Descripción: Barrera protectora cutánea en spray para piel sensible, no irritante y flexible. Crea una película impermeable a efluentes corrosivos. No produce la acumulación de película sobre la superficie cutánea, dejando respirar la piel. Compuesto por Copolímeros de siloxano (siliconas). Ideal para todo tipo de piel, inclusive piel sensible, de fácil aplicación, sin fragancia e incolora. Hipoalergénico.

Indicación: Aplicar en pieles con eritema y maceración, principalmente. También se puede utilizar en todo tipo de piel incluso en pieles sensibles. Es de fácil aplicación, sin fragancia e indolora. Aplicar a unos 10 cm de la piel.

Frecuencia de Uso: Es recomendable repetir la aplicación cada 12-72 horas, en función de las condiciones en que se encuentra la superficie de la piel.



Código CVT	Tamaño	Presentación Spray
423286	28 ml	1 unidad
423288	50 ml	1 unidad



HIDRATANTE, HIDROGEL AMORFO

7

PRODUCTO



Descripción: Hidrogel amorfo a base de Carboximetilcelulosa Sódica-Pectina y Agua. Hidrata el tejido seco favoreciendo el ambiente húmedo fisiológico, favoreciendo la formación de tejido de granulación. Actúa como desbridante autolítico al activar a través de la humedad las enzimas proteolíticas del paciente.

Indicación: En heridas y úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



Código CVT	Tamaño	Presentación
187990	15 grs.	Caja x 10 uds.
187987	30 grs.	Caja x 30 uds.



convatec
— forever caring —



www.convatec.cl



+56 2 2840 5200



convatec.chile@convatec.com

8

SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

FLEXI-DRESSTM

PRODUCTO

Descripción: Venda de gasa impregnada con óxido de zinc no solidificable para terapia de compresión reducida (Bota de Unna). Contiene glicerina, aceite de resino y vaselina, permitiendo que la piel periulceral permanezca humectada conservando un medio ambiente húmedo, favoreciendo la epitelización. La venda proporciona una compresión de 20 mmHg que favorece el retorno venoso a través de una terapia de compresión reducida.

Indicación: Tratamiento de úlceras vasculares mixtas, venosas y edemas linfáticos con ITB mayor a 0.5.

Frecuencia de Cambio: Máximo 7 días, dependiendo de la periodicidad de las curaciones.



Código CVT

Tamaño

Presentación

650941

10,2 x 914,4 cm

Caja 1 ud.



ABSORBENTE

ConvaMax™ SUPERABSORBER

Descripción: Es un apósito estéril con una capa no tejida permeable al aire e impermeable al agua y con una capa de almohadilla superabsorbente. La estructura en tres capas facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre de la herida más rápido. Proporciona una absorción superior y bloquea el exudado, ello minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional.

Indicación: Heridas y úlceras con exudado de moderado a abundante, como apósito primario o secundario. No recortar.

Frecuencia de Cambio: Cada 48 a 72 horas como primario y como secundario dependiendo de las características del apósito primario utilizado.



Código CVT	Tamaño	Presentación
422567	10 x 10 cms	Caja 10 unidades
422570	15 x 15 cms	Caja 10 unidades
422572	20 x 20 cms	Caja 10 unidades



convatec
— forever caring —



www.convatec.cl



+56 2 2840 5200



convatec.chile@convatec.com

10

PRODUCTO

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

Avelle™

Negative pressure, positive power

Descripción: Sistema de Terapia de Presión Negativa Portable, sin cánister. Combina la Terapia de Presión Negativa y Tecnología Hydrofiber para un óptimo tratamiento de heridas. El sistema mantiene una presión de 80mmHg de forma continua. La bomba es desechable y tiene una duración de 30 días. La capacidad de absorción y retención de la Tecnología Hydrofiber® garantiza que el exudado permanezca retenido sin retornar a la herida.

Indicaciones: Heridas de baja/media complejidad y de hasta 2 cm de profundidad, con exudado leve a moderado.



ICC

Medida / Presentación

422285	Bomba Avelle
421552	Apósitos 16x16 cm. Almohadilla 8x8 cm
421553	Apósitos 16x21 cm. Almohadilla 8x13 cm
421554	Apósitos 12x21 cm. Almohadilla 4x13 cm
421555	Apósitos 12x31 cm. Almohadilla 4x23 cm
422155	Apósitos 12x41 cm. Almohadilla 4x33 cm
422157	Apósitos 26x26 cm. Almohadilla 18x18 cm

Avalon

INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE



Avalon es una compañía farmacéutica con presencia en Latinoamérica, para nosotros la innovación es un pilar corporativo. Nuestra filosofía gira en torno a brindar a cada paciente una vida más saludable y plena con productos de última tecnología.



www.avalonpharmaceutical.cl



servicioalclientechile@avalon.com.co



+56 951785504



Suecia #211. Providencia Santiago

REGENERADOR, ANTIOXIDANTE

Reoxcare®

NATURAL DETOX

Descripción: Apósito antioxidante compuesto por una matriz absorbente de semilla de algarrobo liofilizada de 9x4 cm y una solución de hidratación antioxidante compuesta por acetilcisteína y cúrcuma de 10 ml. Para aplicarla abrir el blíster, hidratar la matriz utilizando toda la solución. Esperar 1 minuto antes de aplicar al paciente. Solo aplicar en la úlcera y cubrir Reoxcare con un apósito secundario según el nivel exudativo de la lesión.

Indicación: Aplicar en pacientes con heridas crónicas con colonización crítica. Solo aplicar en la úlcera.

Frecuencia de cambio: Cada 2 a 4 días.



Presentación	Tamaño	Código interno
Solución Antioxidante 10 ml.	1 apósito 9x4 cm	537

REGENERADOR, ANTIOXIDANTE

Reoxcare® gel

NATURAL DETOX

Descripción: Hidrogel, antioxidante e hidratante, compuesto por ingredientes naturales como LGB (galactomanano), ácido ascórbico, vitamina E, licopeno y cúrcuma el cual produce una disminución significativa de los radicales libres proporcionando una alta defensa antioxidante. Antes de aplicar, limpiar la piel y úlcera, apretar el tubo con suavidad manteniendo la boquilla apartada de la superficie de la úlcera, aplicar el gel en el área estéril del campo del equipo de curación, una cantidad suficiente de gel para cubrir toda la lesión. Sobre el gel aplicar un apósito secundario según necesidad. El tubo contiene 12 gramos de hidrogel antioxidante.

Indicación: En pacientes con heridas crónicas con colonización crítica. Se puede aplicar en la úlcera y en la zona perilesional.

Frecuencia de cambio: Cambiar cada 24 a 48 horas



Presentación	Tamaño	Código interno
Reoxcare Hidrogel	Caja x 3 tubos, 12 g c/u	855

REVESTIMIENTO DÉRMICO

SUPRATHEL®

TU NUEVA PIEL

PRODUCTO

5

Descripción: Es una membrana microporosa absorbente compuesta por ácido poliláctico, carbonato de trimetileno y Caprolactona la cual es homologada como reemplazo aloplástico de la piel en el tratamiento de las heridas epidérmicas y dérmicas. Actúa como sustituto de piel, altamente permeable al oxígeno y al vapor de agua. Proporciona un entorno favorable para la cicatrización de heridas y quemaduras. La acidificación de la herida a través de Suprathel® crea un entorno desfavorable para los microorganismos y, por lo tanto, minimiza el riesgo de infección, estimula la migración de fibroblastos y síntesis de colágeno para la formación del nuevo tejido. El producto se torna transparente, permitiendo la monitorización de la herida. Se desprende espontáneamente de las áreas epitelizadas de la piel en 4 a 6 semanas

Indicación:

- Quemaduras de espesor parcial grado IIa y IIb.
- Heridas injertadas
- Necrólisis epidérmica tóxica
- Síndrome de Steven Johnson
- Epidermólisis Bullosa
- Zonas donantes
- Epitelización de heridas

Nota: Suprathel® debe de aplicarse sobre un lecho agudo; máximo 72 horas después de producida la lesión.

Frecuencia de cambio: Solo requiere una aplicación, reabsorbible en un período de 4 a 6 semanas.



	Presentación	Empaque	Código interno
SUPRATHEL®	9 x 10 cm	1 membrana x sobre	110910
	18 x 10 cm		111810
	18 x 23 cm		111823



COMERCCIA

TU DÍA
A DÍA
NOS
IMPORTA

PRODUCTOS
CLÍNICOS

PORQUE
QUEREMOS
CUIDARTE





SANTIAGO

Encuentra y compra todos
nuestros productos en:



www.comerccia.cl



eespinoza@inheridas.cl



(+56) 9 62371031



Avda. Salvador 737
Providencia

Despacho a todo Chile

FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICO



Descripción: Filtro es una malla compuesta por 50% algodón de baja densidad y 50% tela acrílica con adhesivo hipoalergénico, adaptable a la lesión, compatible con todo tipo de apósitos y otros tratamientos de descargas.

No se debe mojar. Cortar con tijeras de yeso. Realizar el corte a 0.5 a 1 cm de la lesión. No utilizar en pacientes isquémicos, infección o edema.

Indicación: Úlceras de pie diabético neuropática y neuro-isquémica; o cualquier tipo de patología que necesite descarga.

Frecuencia de Uso: 48-72 horas.

ID Comerccia	Tamaño cm	Espesor mm
FLT610	10 x 10	6
FLT650	10 x 50	6
FLT6300	10 x 300	6
FLT810	10 x 10	8
FLT850	10 x 50	8
FLT8200	10 x 200	8



Essity Health & Medical



Somos una compañía multinacional del área de la salud, con base en Europa y líder en el Cuidado de Heridas, Terapia Compresiva y Ortopedia a nivel mundial. Ofrecemos soluciones terapéuticas integrales para apoyar a sus pacientes en todas las etapas del tratamiento.





www.medical.essitylatam.com



contactomedicalSC@essity.com


www.medical.essitylatam.com

contactomedicalSC@essity.com

Región / Comuna	Representante de Ventas		
SANTIAGO			
San Miguel	ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	(2) 25220528	hbh_cris2006@hotmail.com
Vitacura	CASA DEL ENFERMO	(2) 23650798	jivo@vtr.net
Providencia	CASA DEL ENFERMO	(2) 22324396	accemedltda@adsl.tie.cl
Vitacura	VITAL SALUD	(2) 26979370	vitalsalud690@gmail.com
Ñuñoa	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 22693350	jefaquilnortopediasuiza@gmail.com
Santiago	Botiquines a Domicilio	(2) 2556 6066	claudio@geerdink.cl
Santiago	CORVEL Diagonal Paraguay 83 of 42	9 75318324	
Santiago	Farmacia San Antonio San Antonio 575	226640094	
Santiago	Vital Salud Teatinos 690	226979370	
Independencia	Martimed Doc Carlos Tobar 1030	228238896	
REGIONES			
Iquique	FARMACIAS ARAUCO	(9) 98494912	fdo.ale.h@hotmail.com
Calama	Ortopedia El Loa	(55) 2311946	ortopediaelloa@hotmail.com
Copiapó	NAT Ortopedia	(52) 2239768	natortopedia@gmail.com
Talca	Coldiab	(9) 40180865 (71) 2310716	ventas@coldiab.cl
Temuco	ORTHOSALUD	(45) 2230222	gerencia@orthosalud.cl
Valdivia	Valdmed Ltda	(9) 6840283 (63) 2244192	ventas@valdmed.cl
Puerto Montt	TOPMEDICAL	(65) 2347389	ventas@topmedical.cl
Punta Arenas	Ortho Med Ltda	(61) 2237070	ventas@orthomed.cl
Rancagua	Casa Santiago Astorga 71	56 9 9019 0435	gerencia@casasantiago.cl
La Serena	Laboratorio Ortopedico Genesis Balmaceda 1047	51 228 3245	ventas.labgenesis@gmail.com

BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA DE DACC

CUTIMED® SILTEC® SORBACT

Descripción: Espuma de poliuretano con tiras superabsorbentes con cubierta de DACC (dialquilcarbamoilo), que atrapa las bacterias en su superficie y absorbe exudado. Control pasivo de la carga biológica. Libre de sustancias químicas, fármacos y látex. Vigencia 3 años. No usar con ungüentos o pomadas grasas que interfieren con la interacción hidrófoba antimicrobiana del apósito. Puede cortarse, preferible en los bordes de silicona. Cubrir la herida dejando por lo menos 2 cm de distancia perilesional.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado de moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Curación cada 3-4 días o según saturación de exudado.



Código	Medidas	Unidad de venta
73251-00001	Cutimed Siltec 12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73251-00000	Cutimed Siltec 7.5cm x 7.5cm	Caja x 10
73288-00005	Cutimed Siltec Heel 16cm x 24cm	Caja x 5

APÓSITO ABSORBENTE

CUTIMED® SORBION®

Descripción: Apósito hidroactivo superabsorbente con núcleo interno con polímeros para un alto índice de retención de agua. La capa externa está fabricada con un fieltro de polipropileno sellado por ultrasonido. No contiene ninguna sustancia activa farmacológicamente, ni adhesivo o pegamento.

Indicaciones: Heridas o úlceras con abundantes niveles de exudado.

Tiempo de uso: Cada 3 a 4 días o según el nivel de exudado



Código	Medidas	Unidad de venta
73232-00006	Sachet 10cm x 10cm	Caja x 10
73232-00009	Sachet 10cm x 20cm	Caja x 10

PROTECTOR CUTÁNEO CUTIMED® PROTECT

Descripción: Película protectora cutánea sin alcohol. Usada para proteger la piel, con secado rápido en 30 segundos. Mejora la adhesión de los adhesivos.

Indicaciones: En heridas o úlceras con pieles maceradas o eritematosas. También para evitar las dermatitis por los fluidos en la incontinencia urinaria y/o fecal, ostomías, adhesivos y sustancias irritantes para la piel. Protección de la piel a la fricción y presión por inmovilización prolongada.

Frecuencia de Uso: Aplicar spray o aplicador cada 72 horas o mayor frecuencia según exposición a humedad.



Código	Medidas	Unidad de venta
72653-00001	Spray de 28ml	Caja x 12
72652-00003	Pomo de 90gr	Caja x 12
72654-00001	Sachet de 1ml estéril	Caja x 25

6 CREMA HIDRATANTE, ESPUMA DE UREA AL 10%

CUTIMED® ACUTE

Descripción: Lubricante cutáneo, espuma hidratante de urea al 10%, para hidratar piel sana seca o extraseca. Fortalece el equilibrio hídrico de la piel. Sin olor y de rápida absorción.

Indicaciones: Para pieles pigmentadas, descamadas y sanas. Ideal para pacientes con pie diabético y para pacientes con insuficiencia venosa incluso con uso de medias de compresión.

Frecuencia de Uso: Aplicar 1 o 2 veces al día según necesidad.



Código	Medidas	Unidad de venta
72641-00031	Envase de 125ml	Spray individual

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC

Descripción: Línea de apósitos de espuma hidrocélular de poliuretano con bandas termofusionadas superabsorbentes que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una capa perforada siliconada, que permite una adherencia suave a la zona aledaña a la herida, sin generar adhesión en la herida ni la epidermis en proceso de regeneración. Adecuada para la liberación de presión en zonas de apoyo. Absorbe verticalmente los fluidos aún bajo compresión. Se puede recortar.

Indicaciones: En colonización baja con exudado moderado a abundante. Para la prevención de lesiones por presión en zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras. En prevención sobre piel sana se puede mantener por 7 días.



Código	Medidas	Unidad de venta
73285-00002	Siltec 10cm x 20cm	Caja x 10
73284-00001	Siltec B 12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73284-00004	Siltec B 22.5cm x 22.5cm	Caja x 5
73283-00001	Siltec L 10cm x 10cm	Caja x 10
73288-00001	Siltec plus 10cm x 10cm	Caja x 10
73285-00000	Siltec 5cm x 6cm	Caja x 5
73287-00000	Siltec Sacrum 17,5cm x 17,5cm	Caja x 5

HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

CUTICELL® CONTACT

Descripción: Es una lámina de contacto de silicona microperforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales o en epitelización. Debe fijarse a la zona perilesional sana traspasando los bordes de la herida 2cm. En pieles maceradas, aplicar solo en la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. También se puede utilizar como apósito secundario cuando se necesita proteger un apósito primario, como hidrogel o colágenos.


Frecuencia de Cambio: Cada 7 días en colonización baja. En epitelización se puede cambiar a los 10 a 14 días. Como apósito secundario, según características del apósito primario.



Código	Medidas	Unidad de venta
72680-00000	5cm x 7.5cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00001	7.5cm x 10cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00002	10cm x 18cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00003	15cm x 25cm	Caja x 5 Apósitos

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO

JOBST® ULTRASHEER

www.JOBST.CL 

PRODUCTO

Descripción: Medias de compresión médica para mujer, fabricada por hilos de microfibras, transparente y transpirable. Proporciona un adecuado manejo de la humedad, frescura y suavidad en la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg., en la zona del tobillo. Existen en formato Rodilla, Muslo y Panty, todas en tallas S-M-L-XL.

Indicación: Para la prevención y el tratamiento de la enfermedad venosa crónicas desde piernas cansadas, telangetasias, várices, edema y cambios de coloración de la piel, hasta úlcera venosa cicatrizada.


Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.



Código	Medidas	Unidad de venta
75201-00015	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada S Honey	Caja individual
75202-00015	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada M Honey	Caja individual
75203-00015	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada L Honey	Caja individual
75204-00015	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada XL Honey	Caja individual

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO

JOBST® FORMEN

 www.JOBST.CL

Descripción: Calcetín de compresión de vestir, creado específicamente para hombre. Posee tejido de microfibras que absorben la humedad, siendo respirable y confortable, no produce calor ni prurito. Tejido firme y amigable con la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg en formaro Rodilla y Muslo. Mejora la circulación sanguínea, evita el edema y favorece el alivio continuo de las piernas cansadas y dolorosas. Son reutilizables.

Indicaciones: Para la prevención y tratamiento de la Insuficiencia venosa. Para le prevención de recidivas secundarias de las úlceras venosas

Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.




Código	Medidas	Unidad de venta
77160-00031	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada S Negro	Caja individual
77161-00030	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada M Negro	Caja individual
77162-00031	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada L Negro	Caja individual
77163-00030	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada XL Negro	Caja individual

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO ALTA COMPRESIÓN

11

JOBST® ULCERCARE

www.JOBST.CL 


PRODUCTO

Descripción: Calcetín compresivo doble capa con cierre para manejo de úlcera venosa activa. Provee compresión graduada de 40 mmHg. requerida para la cicatrización de úlceras venosas, distribuidas en 2 capas: interna blanca para su uso continuo 24 horas (2 en el kit para permitir su recambio) y externa beige con cierre para facilitar su aplicación para uso durante el día. Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. Permite mantener el calzado y ropa habitual.

Indicaciones: En pacientes portador de insuficiencia venosa crónica con úlcera activa con indicación de alta compresión, sin presencia de edema.


Frecuencia de Uso: La calceta blanca se utiliza durante las 24 horas y la beige durante el período de movilidad (día).

Código	Medidas	Unidad de venta
73631-00011	S c/cierre DER	Caja individual
73631-00012	M c/cierre DER	
73631-00013	L c/cierre DER	
73631-00014	XL c/cierre DER	
73631-00015	XXL c/cierre DER	
73631-00001	S c/cierre IZQ	
73631-00002	M c/cierre IZQ	
73631-00003	L c/cierre IZQ	
73631-00004	XL c/cierre IZQ	
73631-00005	XXL c/cierre IZQ	

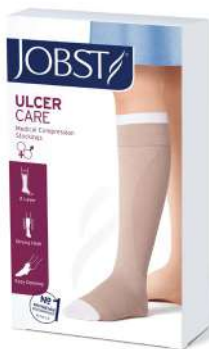

SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS


JOBST® COMPRI2

 www.JOBST.CL

Descripción: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg. en el maleolo, es desechable. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort de almohadilla de poliuretano porosa que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una venda de compresión cohesiva con indicadores que ayudan a aplicar la correcta compresión. se está ejerciendo una correcta compresión cuando estos indicadores de óvalos se convierten en círculos.

Indicaciones: En úlceras venosas Tipos 3 y 4, principalmente y para el manejo del edema y linfedema.

Frecuencia de cambio: Para uso continuo por 7 días o según frecuencia de cambio del apósito primario.

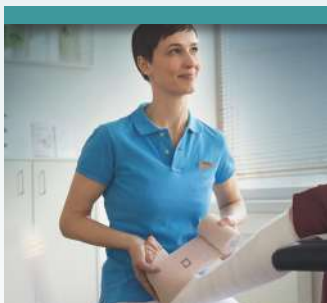

Código	Medidas	Unidad de venta
76271-00000	18-25cm - Regular Compression (ITB>0,8)	Kit de 2 vendas

CINTA NO OCLUSIVA DE GASA FIXOMULL STRETCH

Descripción: Cinta adhesiva microporosa de gasa no tejida de poliéster, elasticada en ambos sentidos. Se recomienda recortar los bordes redondeados para fijación duradera.

Indicaciones: Para fijación de todo tipo de apósitos, tubos, sondas, catéteres, protección cutánea en vendaje funcional etc. Altamente adhesivo muy amigable con la piel.

Frecuencia de uso: hasta 7 días



Código	Medidas	Unidad de venta
02036-00000	5cm x 10m	Rollo en caja individual
02037-00000	10cm x 10m	Rollo en caja individual
02038-00000	15cm x 10m	Rollo en caja individual

CINTA NO OCLUSIVA DE SILICONA

FIXOMULL SKIN SENSITIVE

Descripción: Cinta adhesiva de poliéster no tejida recubierta en una cara con adhesivo de silicona. Se recomienda recortar los bordes redondeados para fijación duradera. Es reposicionable.

Indicaciones: Para una fijación suave y confiable, en pieles sensibles y comprometidas como adulto mayor, neonatos y pieles expuestas a radiaciones. Uso en todas las partes del cuerpo, incluidas las que se mueven con frecuencia o que tienen contorno.

Frecuencia de uso: hasta 7 días



Código	Medidas	Unidad de venta
79965-00001	5cm x 5m	Rollo en caja individual
79965-00002	10cm x 5m	Rollo en caja individual



GRUPOCHIC S.A.

Somos una empresa con más de 40 años en el mercado de productos con compresión graduada, líderes en prescripción médica, que a través de nuestras marcas certificadas como dispositivos médicos y fabricadas en Italia **VARIMED** e **IBICI**, ponemos a disposición de nuestros clientes, diferentes productos compresivos tales como calcetines, medias, pantys, manga linfedema, etc, con tejidos suaves para el tratamiento y prevención de problemas originados por insuficiencia venosa.

Nuestro sueño es ver cada día a más y más personas viviendo su vida como sueñan, independiente de las afecciones que puedan sufrir en el sistema de retorno venoso.

Nuestras marcas cuentan con las siguientes certificaciones que avalan su calidad y uso:

Certificaciones



CE: productos certificados como dispositivos médicos.



Certificación internacional Oeko-Tex®

Standard 100: Ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.



Certificado Sanitized: Función higiénica permanente.



Certificación de excelencia Italiana: Certificado de calidad para productos diseñados y fabricados en Italia.



www.varimed.cl



contacto@grupochic.cl

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

KIT DE HERIDAS CON CIERRE DOBLE CAPA

Descripción: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40 mmHg. a nivel del maléolo. El kit trae 2 medias y un calzador de seda; una media color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, con cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 89% de poliamida, 10% de hilo caucho y 1% elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 15/20 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente; CEAP C6; ITB <0,9 a 1,2.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mmHg.



Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL
Circunferencia sobre tobillo (cm)	18-23	23-28	28-33	33-38
Circunferencia bajo rodilla (cm)	28-33	33-38	38-43	43-48

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

KIT DE HERIDAS SIN CIERRE DOBLE CAPA

Descripción: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40mmHg. a nivel del maléolo. El Kit trae 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, sin cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 77% de poliamida y 23% de elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 20/30 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente, CEAP C6; ITB >0,9 a 1,2.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mmHg.



Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL
Circunferencia sobre tobillo (cm)	18-23	23-28	28-33	33-38
Circunferencia bajo rodilla (cm)	28-33	33-38	38-43	43-48

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

CALCETIN MICROFIBRA PUNTA ABIERTA

Descripción: Sistema elástico, el set trae 2 medias de color café, cada una esta compuesta de 78% de poliéster y 22% de elastano, con punta abierta, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 30 a 40 mmHg.

Indicación: Úlcera venosa Tipo 2 y 3. También en tratamiento de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica y presenta várices. CEAP C5; ITB>0,9 a 1,2.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias



Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL
Circunferencia sobre tobillo (cm)	18-23	23-28	28-33	33-38
Circunferencia bajo rodilla (cm)	28-33	33-38	38-43	43-48

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE BAJA COMPRESIÓN

CALCETIN MICROFIBRA PUNTA CERRADA

Descripción: Sistema compresivo elástico, el set trae 2 medias, cada una esta compuesta de 66% de polyester y 34% de elastano, con punta cerrada, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 20 a 30 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 1 a 4 mixtas y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica o en área no crítica con várices.

Frecuencia de uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias, siempre que no presente úlcera venosa, en este caso se deben mantener por 24 horas.



Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL	6-XXL
Circunferencia sobre tobillo (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
Circunferencia bajo rodilla (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42



Blunding y Medi, dos empresas internacionales de vasta trayectoria, se unen para ofrecer la última tecnología en órtesis y compresión. Entre ambas, acumulan más de 100 años investigando y desarrollando productos que ayudan a mejorar el bienestar de millones de personas en el mundo.

Contacto

María Teresa Gatica

Encargada Mercado Público



+562 2350 5900(56)



mgatica@blunding.com

PUNTOS DE VENTA

Locales Medishop



Tabancura 1091, local 2, Vitacura, tel. 22 793 7388

Salvador 714, Providencia, tel. 22 269 6419

Apumanque, local 288, tel. 22 224 4107



Salvador, 714, Providencia



Mall Apumanque, Local 228



Tabancura, 1091, Vitacura

Atención a pacientes



Casa Salvador

Salvador 651, Providencia,
tel. 22 839 0596



www.casasalvadorchile.com



Salvador, 651, Providencia



Las Dalias, 2465, Macul

**Despachos
a todo Chile**

EQUIPO MESI PARA MEDICIÓN DE ÍNDICE TOBILLO BRAZO

MESI ABPI MD

Descripción: Dispositivo de medición del índice tobillo - brazo, rápido, preciso y objetivo, permite el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica (EAP).

Indicaciones:

- Evaluar el flujo sanguíneo arterial antes de la terapia de compresión.
- Descartar EAP/ EAMI en pacientes con heridas en la extremidad inferior.
- Evaluar el potencial de cicatrización de heridas.



MÁS INFORMACIÓN



CUIDADO DE HERIDAS EN 3 PASOS

Paso 1	Paso 2	Paso 3
Obtener medición de ABI	Determinar tipo de úlcera	Asignar tratamiento
0.8 < ABI	Úlcera venosa	Terapia de compresión
0.51 < ABI < 0.79	Úlcera mixta	Terapia de compresión ajustada. Posible riesgo de EAP
< ABI 0.51	Úlcera arterial	Tratamiento del paciente maximizando la perfusión en las piernas. Alto riesgo para la EAP

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

KIT BOTIN DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO

Descripción: Botín post quirúrgico para la descarga del antepié, con punta abierta, cuenta con 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera. Suela resistente, ligera y antideslizante. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Post operatorio para la estabilización y la descarga
- Post operatorio en caso de Fascitis Plantar
- Para tratamiento de heridas

MÁS INFORMACIÓN



Talla	Medida calzado	ID Blunding
S	34-35	MI-18 KIT
M	36-39	MI-18 KIT
L	40-43	MI-18 KIT
XL	44-46	MI-18 KIT

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA

Descripción: Órtesis conformada por 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera plantar. Reduce la descarga e inmoviliza el pie. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Pie de Charcot

MÁS INFORMACIÓN



	Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Cenabast
BOTA LARGA	S	34-35	MI-177	100002200
	M	36-39	MI-177	100002301
	L	40-43	MI-177	100002302
	XL	44-46	MI-177	100002303
BOTA CORTA	S	38-39	MI-170	-
	M	39-42	MI-170	-
	L	43-44	MI-170	-
	XL	45-46	MI-170	-

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

ZAPATO DE DESCARGA CUIDADO DE HERIDAS

Descripción: Órtesis conformada por dos plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera, plantilla rígida para proteger la flexión y torsión durante el tiempo de uso. Cuenta con cierres de contacto (velcro), que permiten la apertura total del zapato para facilitar la colocación y puede desmontarse la cobertura de la punta para descubrir la zona de los dedos. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Post-quirúrgicos



MÁS INFORMACIÓN



Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Cenabast
S	35-37	MI-178	100002186
M	38-40	MI-178	100002188
L	41-43	MI-178	100002189
XL	44-47	MI-178	100002199

ZAPATOS TERAPEÚTICOS

ZAPATOS PARA DIABÉTICO

Descripción: Zapato terapéutico 100% cuero, suela antideslizante, forro interno 100% cuero floater, suave y sin costuras, con suela Rocker antideslizante, talón extra profundo para adaptación de plantillas.

Indicaciones:

- Pacientes diabéticos con riesgo de presentar úlceras plantares, lesiones o alteración de la sensibilidad.
- Pacientes con deformidades en el pie.
- Durante recuperación de lesiones traumáticas en el pie.

MÁS INFORMACIÓN



Talla	ID Blunding	Descripción
35-45	B-9006	zapato deportivo
35-45	B-5071	zapato cierre velcro
34-46	B-5077	zapato con cierre cordón
37-42	B-5070	zapato con cierre cordón

SISTEMAS COMPRESIVOS, BAJA COMPRESIÓN

MAXIS MICRO

medi

PRODUCTO

Descripción: Medias con gradiente de compresión certificada para el tratamiento de insuficiencia venosa, post cicatrización de úlceras venosas y para evitar la recidiva. Disponibles en clase I (18-21 mmHg) y clase II (23-32 mm-Hg).

Indicaciones:

- Úlceras venosas cicatrizadas
- Tratamiento para la insuficiencia venosa
- Úlcera venosa mixta

www.blunding.com
REPRESENTANTE
OFICIAL DE MEDI
EN CHILE

MÁS INFORMACIÓN



Talla	Contorno Supramaleolar	Calf ID Clase II	Calf ID Clase I
I	17-19 cm	E-XA40001	E-XB40001
II	19-21 cm	E-XA40002	E-XB40002
III	21-23 cm	E-XA40603	E-XB40603
IV	23-25 cm	E-XA40604	E-XB40604
V	25-27 cm	E-XA40605	E-XB40605
VI	27-29 cm	E-XA40006	E-XB40006
VII	29-31 cm	E-XA40007	E-XB40007

medi

SISTEMAS COMPRESIVOS, ALTA COMPRESIÓN CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT

Descripción: Set de 3 calcetas, 2 calcetas con hilos de plata de 20 mmHg. cada una, cuentan con efecto prolongado antibacteriano, la que aporta compresión de 20 mmHg. por la noche. La tercera calceta, es de color beige, entrega los otros 20mmHg., al usar las dos calcetas aportan 40 mmHg. durante el día, asegurando una terapia efectiva y eficiente en el cierre de la úlcera venosa, posee ventana de inspección para medir la perfusión distal. La otra calceta de plata sirve para realizar los cambios en cada curación.

Indicaciones:

- Úlcera venosa activa



MÁS INFORMACIÓN



Talla	Contorno Supramaleolar	ID Blunding	ID Cenabast
I	14-20 cm	E-3810071000	1000017539
II	20-22 cm	E-3810072000	1000017324
III	22-24 cm	E-3810073000	1000017325
IV	24-26 cm	E-3810074000	1000017517
V	26-28 cm	E-3810075000	1000017901
VI	28-30 cm	E-3810076000	1000017898
VII	30-32 cm	E-3810077000	1000017347

SISTEMAS COMPRESIVOS, BAJA-ALTA COMPRESIÓN

CIRCAID JUXTA-LITE

medi

10

PRODUCTO

Descripción: Sistema de compresión inelástica con tarjeta inteligente de regulación de mmHg, ajustable con velcros.

Indicaciones:

- Úlceras Venosas
- Edema
- Motricidad limitada
- Insuficiencia venosa crónica



MÁS INFORMACIÓN



Talla	ID Blunding	Descripción
S	E-23023017	Pantorrilla corto
S	E-23033017	Pantorrilla largo
M	E-JU15703	Pantorrilla corto
M	E-23024117	Pantorrilla ancho corto
M	E-23034117	Pantorrilla ancho largo
L	E-23025117	Pantorrilla ancho corto
XL	E-23035117	Pantorrilla ancho largo



*En LBF
somos*

*confiables, resolutivos
y empáticos*





Cobertura
**comercial
y técnica**
en todo el territorio
Chileno

Nuestro equipo está
encantado de poder
ayudarle con
soluciones
costo-efectivas
para prevención
y tratamiento de
heridas.



www.LBF.cl



contacto@LBF.cl



+56 226742200

3 BACTERICIDA, PLATA NANOCRISTALINA METÁLICA

ACTICOAT™ FLEX 3

Descripción: Apósito barrera antimicrobiana de plata nanocristalina*, compuesto de una capa flexible y conformable. Activar la plata metálica con agua bidestilada o hidrogel sobre el apósito. Retirar para hacer estudios de RNM, ECG, ECG.

***Tecnología patentada por NUCRYST Pharmaceuticals Corp**

Indicaciones: Usar en heridas o úlceras infectadas, quemaduras de profundidad parcial y total, zonas dadoras y receptoras de injertos, en combinación con la TPN (Terapia de Presión Negativa), heridas de pie diabético, úlceras venosas infectadas.

Frecuencia de cambio: diario o hasta 48 hrs.



Código LBF	Medidas	Empaque
037-04031	10x10 cm	1/12

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ALLEVYN™

PRODUCTO

Descripción: Apósito espuma hidrocélular trilaminar adhesiva y no adhesiva, para talón y zona sacra. No usar con sustancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre sustancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Heridas y úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante, prevención de lesiones por presión.

Frecuencia de cambio: tratamiento 1 a 2 días o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



**Allevyn
adhesivo**



**Allevyn no
adhesivo**



**Allevyn
Heel**



**Allevyn
Sacrum**

Código LBF	Medidas	Empaque
037-02904	Allevyn adhesivo 7,5 x 7,5 cm	1/10
037-02905	Allevyn adhesivo 12,5 x 12,5 cm	1/10
037-03553	Allevyn no adhesivo 10 x 10 cm	1/10
037-03551	Allevyn heel 10,5 x 13,5 cm	1/5
037-03549	Allevyn sacrum 17 x 17 cm	1/10

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ALLEVYN™ LIFE / LIFE SACRUM

Descripción: Apósito espuma hidrocélular de 5 capas con adhesivo de silicona que permite levantar para observar la zona a proteger y volver a adherir sin dañar la piel. No usar con sustancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre sustancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante, prevención de lesiones por presión.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 hr o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



Allevyn Life



Allevyn Life Sacrum

Código LBF	Medidas	Empaque
037-04643	Allevyn Life 10,3 x 10,3 cm	1/10
037-04452	Allevyn Life 12,9 x 12,9 cm	1/10
037-04533	Allevyn Life 15,4 x 15,4 cm	1/10
037-04451	Allevyn Life Sacrum 17,2 x 17,5 cm	1/10

BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ALLEVYN™ AG GENTLE BORDER

Descripción: Espuma hidrocélular bactericida con borde de silicona. Apósito espuma hidrocélular trilaminar que contiene sulfadiazina de plata y un adhesivo de silicona.

Indicaciones: En heridas o úlceras infectadas con exudado moderado a abundante

Frecuencia de cambio: desde 24 a 48 hrs.



Código LBF	Medidas	Empaque
037-04072	12,5 cm x 12,5 cm	1/10

HIDRATANTE, GEL AMORFO

INTRASITE™ GEL

Descripción: Hidrogel transparente y amorfo, compuesto de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Envase Appli-pak estéril. No aplicar sobre piel sana. Sólo cubrir 80% de la herida. Necesita un apósito como poliéster, tul de silicona o petrolato para que lo contenga.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: usar hasta 72 hrs.



Código LBF	Medidas	Empaque
037-03557	15 gr	1/10

EMULSIÓN HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPOXIGENADO

NOVAMED MILK

Descripción: Está compuesto por ácidos grasos hipoxigenados: linoleico, oleico, palmítico, además de otros ácidos grasos, silicona, vitamina E. 100% libre de látex.

Indicaciones: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas, donde se necesite abarcar grandes superficies.

Frecuencia de uso: 2 a 3 veces al día.



Código LBF	Medidas	Empaque
085-05041	Skincare Milk 100 ml	1/24

ACEITE HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO

NOVAMED OIL

Descripción: Es una solución tópica compuesta de ácidos grasos hiperoxigenados (95%) y silicona (5%). 100% libre de látex.

Indicaciones: En pieles sanas, descamadas, pigmentadas o para prevenir las Lesiones por Presión.

Frecuencia de uso: 2 a 3 veces al día



Código LBF

085-05040

Medidas

Skincare Oil 20 ml

Empaque

1/20

BACTERIOSTÁTICO, MIEL GRADO MÉDICA

ULMOPLUS

10

PRODUCTO

Descripción: Apósito en Gel en base a miel de Ulmo + vitamina C, certificado en NHF con altos niveles de compuestos antibacterianos y antioxidantes. Posee un pH bajo y una osmolaridad alta, lo que favorece el desbridamiento osmótico de las heridas con tejido esfacelado o necrótico. Ayuda a controlar olores, es de fácil aplicación y remoción sin causar traumas en la lesión. No usar en personas con alergia a la miel o al ácido ascórbico, No usar en pacientes menores de 12 meses, No usar en quemadura de 3° grado o en úlceras vasculares de origen arterial. Aplicar solo en el 80% de la lesión, aplicar sobre este un bacteriostático o un hidratante. Proteger la piel con protector cutáneo. No usar en pacientes menores de 12 meses, No usar en quemadura de 3° grado o en úlceras vasculares de origen arterial.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización crítica con exudado escaso, moderado o abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días.

*** Elaborado en Chile.**



Código LBF	Medidas	Empaque
552-04990	30 gr	1/12

HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

JELONET™

Descripción: Apósito de gasa estéril parafinada, suave y de baja adherencia que puede ser utilizada con cualquier medicamento tópico. No combinar con apósitos de plata.

Indicaciones: Aplicar para proteger epidermis dañadas o en fase de maduración, también son útiles como apósitos secundarios.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 hrs. como apósito primario y como apósito secundario, dependerá del tipo de apósito primario que se este protegiendo.



Código LBF

Medidas

Empaque

037-00696

10 cm x 10 cm

1/100

HIDRATANTE, TUL CON PETROLATO

BACTIGRAS™

12

PRODUCTO

Descripción: Apósito de gasa parafina con acetato de clorhexidina al 0.5%, que actúa como agente bacteriostático. No debe ser aplicado en más de 10% del área corporal.

Indicaciones: Para proteger epidermis dañadas o en fase de maduración, con alto riesgo de colonización, como los pie diabéticos. También son útiles como apósitos secundarios.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 hrs como apósito primario y como secundario, dependerá del apósito primario.



Código LBF	Medidas	Empaque
037-04181	5 cm x 5 cm	1/50
037-04182	10 cm x 10 cm	1/10

REMOVEDOR DE ADHESIVO

REMOVE™

Descripción: Es un removedor de adhesivo para la piel, su objetivo es la eliminación de los adhesivos de los dispositivos médicos como cintas adhesivas, vendajes, dispositivos de ostomías. Se presentan en sachet individual. Son solubles en agua.

Indicaciones: Para remover las placas de los estomas y para la retirada de cualquier dispositivo médico adherido en la piel.

Frecuencia de uso: Cada vez que se necesite remover el adhesivo. No aplicar en menores de 12 meses.



Código LBF	Medidas	Empaque
037-03019	4,5 cm x 4,5 cm	1/50

HIDRATANTE, TRANSPARENTE ADHESIVO

OPSITE™ FLEXIGRID™

Descripción: Apósito de poliuretano, transparente y adhesivo, impermeable al agua y a las bacterias, adaptable a cualquier zona y extensión. Use con precaución en piel frágil. Se pueden usar como primario, secundario y para fijar.

Indicaciones: En heridas y úlceras con colonización baja con exudado escaso, que no presenten problemas vasculares. Se pueden aplicar también como apósitos secundarios.

Frecuencia de cambio: Cada 7 días como primario. Como secundario, depende del apósito primario



Código LBF	Medidas	Empaque
037-04197	6 cm x 7 cm	1/100
037-04195	10 cm x 12 cm	1/50
037-04196	12 cm x 25 cm	1/20

RENASYS[®]

RENASYS[®] La Terapia de Presión Negativa más usada en Chile

La simplicidad y flexibilidad de RENASYS[®] permiten mejorar la vida de los pacientes

Smith+Nephew

RENASYS[®] GO

RENASYS[®] EZ MAX

Terapia de Presión Negativa



Escanee el QR
para obtener un catálogo digital





Misión

Curar las Heridas Capacitando
para una Mejor Vida

Actividades FINH


- Atención de pacientes por un equipo especialista en heridas y úlceras
- Capacitación e Investigación clínica
- Ediciones de Guías Clínicas y Revistas
- Asesoría al Ministerio de Salud y FONDEF
- Respaldar a la Sociedad de Enfermeras Latinoamérica en Heridas (SELH)
- Realiza Campañas Sociales



**EM. Marcela
Vergara**



**E.U. Isabel Aburto
DIRECTORA**

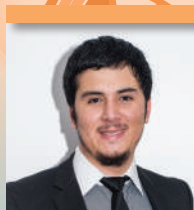

**Ing. Gonzalo
Espinoza**

DIRECTORIO FINH



Dr. Cristián Salas



Dr. Ismael Pizarro



Dr. Rodrigo Julio

AGRADECIMIENTOS

A todas las empresas que colaboraron en esta tercera edición de esta Guía de Insumos Clínicos en Heridas y Úlceras, la que continuará siendo de gran ayuda a los clínicos y a los encargados de compra de insumos en manejo de heridas.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™


Mölnlycke®


MADegOM
Medical Solutions

 **Megalabs**

 **URGO**
MEDICAL
Healing people®

HARTMANN
Helps. Cares. Protects.

Promedon
People + Innovation


CardinalHealth™

 **ConvaTec**

Avalon
INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE

COMERCCIA

 **essity**

VARIMED

 **BLUNDING**
Your Best Choice.

LBF
Insumos Médicos